

Instructions for Use

ENG

**Cutimed® Siltec® PLUS Heel****Product description**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel dressings are an assortment of silicone coated foam dressings. Cutimed® Siltec® PLUS Heel is a sterile, absorbent polyurethane foam dressing for traumatic dressing changes that contains super-absorbent stripes which absorb and lock wound exudate. The wound contact surface is a perforated silicone layer that allows adherence to the peri-wound skin but not to the moist wound bed or to newly formed epithelial tissue. This minimises trauma and pain during dressing changes. The outer film is water-repellent, yet permeable to oxygen and vapour. The foam dressing and the super-absorbent stripes are designed to absorb and to lock away excess wound fluid inside the dressing, promoting a moist wound environment and minimising the risk of maceration. Cutimed® Siltec® PLUS Heel is highly conformable and provides protection of the wound site. Cutimed® Siltec® PLUS Heel leaves no residues in the wound. The dressing reliably retains wound exudate, even under compression. If necessary the dressing can be cut to size. Cutimed® Siltec® PLUS Heel is anatomically shaped for the treatment of heel wounds, gently adheres to the peri-wound skin and stays in place while secondary fixation is applied.

**Indications**

The Cutimed® Siltec® PLUS Heel assortment is indicated for exuding wounds such as: venous and arterial ulcers, pressure ulcers, diabetic gangrenes, surgical incisions, skin grafts and donor sites, lacerations or abrasions. Cutimed® Siltec® PLUS Heel is recommended for wounds with low to high exudate levels.

**Contraindications**

Do not use on patients with a known sensitivity to any of the product components.

**Warnings and precautions**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel is packaged for single use. Do not re-use or re-sterilise as there is a risk of transmission of body fluids or contaminated tissue between patients. Do not use if pouch is open or damaged. Discard open or unused material. The wound should be inspected for signs of infection and treated according to clinical practice if required. For external use only. Do not use with oxidising solutions such as hypochlorite or hydrogen peroxide. Remove the dressing prior radiation therapy.

**Directions for use**

- Clean the wound according to good clinical practice.
- Make sure, the surrounding skin is dry.
- Choose an appropriate dressing size that covers the wound and overlaps the wound edges. **(A)**
- Open the pouch and take out the dressing. Ensure sterility.
- Remove protective film **(B)** and apply with the adherent side towards the wound. **(C)**
- Avoid stretching the dressing.
- Apply additional dressing fixation.
- If necessary, Cutimed® Siltec® PLUS Heel can be used in combination with other dressings e.g. Cutimed® Sorbact® (in case of infected wounds) or Cutimed® Gel (for dry, necrotic wounds).
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel may be used on an infected wound in addition to antimicrobial therapy under medical supervision.
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel can remain in place for up to seven days, depending on wound conditions and exudate levels. It is recommended to change the dressing every 24 hours initially, moving to less frequent changes as necessary.
- Carefully remove any additional dressing fixation and gently remove Cutimed® Siltec® PLUS Heel from the wound and discard.
- If required, cleanse the wound prior to application of a new dressing.

**Storage**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel should be stored in dry conditions. Do not expose to direct sunlight.

Date: June 2016

Notice d'emploi

F

**Cutimed® Siltec® PLUS Heel****Description du produit**

Les pansements Cutimed® Siltec® PLUS Heel sont un assortiment de pansements revêtus de silicone. Cutimed® Siltec® PLUS Heel est un pansement stérile absorbant en polyuréthane conçu pour des changements de pansement traumatiques, contenant des bandes super-absorbantes qui absorbent et retiennent l'exsudat de la plaie. La surface de contact avec la plaie est une couche perforée de silicone assurant une adhérence à la peau périphérique sans adhérer au lit de la plaie humide ou au tissu épidermique nouvellement formé. Cela permet de limiter les traumatismes et la douleur lors des changements de pansements. Le film extérieur est résistant à l'eau mais perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau. Le pansement en mousse et les bandes super-absorbantes sont conçus pour absorber les fluides excédentaires de la plaie et les retenir dans le pansement, créant ainsi un environnement humide favorable à la cicatrisation de la plaie en minimisant le risque de macération. Cutimed® Siltec® PLUS Heel est hautement conformable et assure la protection du site de la plaie. Cutimed® Siltec® PLUS Heel ne laisse aucun résidu dans la plaie. Le pansement assure une retenue fiable de l'exsudat de la plaie, même sous des bandages de compression. Si nécessaire, le pansement peut être découpé à la taille voulue. Cutimed® Siltec® PLUS Heel a une forme anatomique adaptée au traitement des blessures de la cheville, adhère en douceur à la peau périphérique et reste en place pendant l'application d'un pansement de fixation supplémentaire.

**Indications**

L'assortiment Cutimed® Siltec® PLUS Heel est indiqué pour le traitement des plaies exsudatives telles que : ulcères veineux et artériels, ulcères de pression, gangrènes diabétiques, incisions chirurgicales, greffes de peau et sites donneurs, lacerations ou abrasions. Cutimed® Siltec® PLUS Heel est recommandé pour le traitement des plaies avec exsudat faible à élevé.

**Contre-indications**

Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue à l'un des composants du pansement.

**Mises en garde et précautions d'emploi**

Chaque pansement Cutimed® Siltec® PLUS Heel est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser ou restériliser afin d'éviter tout risque de transmission de fluides corporels ou de tissus contaminés entre les patients. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Éliminer tout matériel ouvert ou non utilisé. Il convient d'examiner la plaie pour détecter les signes d'infection et, le cas échéant, de les traiter conformément au protocole clinique habituel. Uniquement destiné à un usage externe. Ne pas utiliser avec des solutions oxydantes telles que l'hypochlorite ou le peroxyde d'hydrogène. Retirer le pansement avant administration d'une radiothérapie.

**Mode d'emploi**

- Nettoyer la plaie selon le protocole habituel.
- S'assurer que la peau qui entoure la plaie soit sèche.
- Choisir une dimension de pansement appropriée, qui couvre la lésion et dépasse des bords de la plaie. **(A)**
- Ouvrir l'emballage et retirer le pansement. Utiliser une technique stérile.
- Retirer le film de protection **(B)** et appliquer le pansement avec le côté adhésif vers la plaie. **(C)**
- Ne pas étirer le pansement.
- Appliquer un pansement de fixation supplémentaire.
- Si nécessaire, Cutimed® Siltec® PLUS Heel peut être utilisé en combinaison avec d'autres pansements tels que : Cutimed® Sorbact® (pour les plaies infectées) ou Cutimed® Gel (pour les plaies sèches ou nécrotiques).
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel peut être utilisé sur une plaie infectée en complément d'un traitement antimicrobien, sous contrôle médical.
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel peut rester en place jusqu'à sept jours, en fonction de l'état de la plaie et de la quantité d'exsudat. Il est recommandé de changer le pansement toutes les 24 heures au départ, et de procéder à des changements moins fréquents selon les besoins.
- Retirer avec précaution le pansement de fixation puis retirer délicatement le pansement Cutimed® Siltec® PLUS Heel du lit de la plaie. Jeter le pansement usagé.
- Si nécessaire, nettoyer la plaie avant d'appliquer un nouveau pansement.

**Entrega**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel doit être stocké à l'abri de l'humidité. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Date : Juin 2016

Indicaciones para el uso

E

**Cutimed® Siltec® PLUS Heel****Descripción del producto**

Los apósitos Cutimed® Siltec® PLUS Heel son una gama de apósitos de espuma recubiertos de silicona. Cutimed® Siltec® PLUS Heel es un apósito de espuma de poliuretano absorbente con el que se consigue realizar cambios traumáticos de apósito y que contiene bandas superabsorbentes que absorben y retienen el exudado de la herida. La superficie de contacto con la herida es una capa perforada de silicona, que permite la adherencia a la piel que rodea la herida y no al lecho húmedo de la herida ni al tejido epitelial recién formado. Esto minimiza el trauma y el dolor durante los cambios del apósito. La película exterior es repelente al agua, pero permeable al oxígeno y al vapor. El apósito de espuma y las bandas superabsorbentes se han diseñado para absorber y retener dentro del apósito el exceso de exudado, favoreciendo un ambiente húmedo y minimizando el riesgo de maceración. Cutimed® Siltec® PLUS Heel es altamente adaptable y proporciona protección al lugar de la herida. Cutimed® Siltec® PLUS Heel no deja residuos.

El apósito retiene de manera segura el exudado de la herida, incluso bajo vendajes compresivos. El apósito puede cortarse a la medida necesaria. Cutimed® Siltec® PLUS Heel presenta una forma anatómica destinada a tratar las heridas de los talones y se adhiere suavemente a la piel que rodea la herida manteniéndose inmóvil mientras se fija con el apósito secundario.

**Indicaciones**

La gama de apósitos Cutimed® Siltec® PLUS Heel está indicada para heridas exudativas tales como: úlceras venosas y arteriales, úlceras por presión, gangrenas diabéticas, incisiones quirúrgicas, injertos cutáneos, zonas donadas, laceraciones y abrasiones. Cutimed® Siltec® PLUS Heel está recomendado para heridas con un nivel de exudación de bajo a alto.

**Contraindicaciones**

No utilizar el producto en pacientes con sensibilidad conocida a uno de sus componentes.

**Advertencias y precauciones**

El apósito Cutimed® Siltec® PLUS Heel está envasado para un solo uso. No se debe reutilizar ni reesterilizar, ya que existe riesgo de transmisión entre pacientes de fluidos corporales o tejidos contaminados. No utilizarlo si el empaque está abierto o dañado. Eliminar cualquier elemento del producto abierto o no utilizado. La herida debe ser examinada para determinar si hay signos de infección y, dado el caso, se debe tratar conforme a la práctica clínica. Sólo para uso externo. No utilizar con soluciones oxidantes como el hipoclorito o el peróxido de hidrógeno. Retirar el apósito antes de aplicar radiación.

**Instrucciones de uso**

- Limpia la herida conforme a la buena práctica clínica.
- Asegurarse que la piel circundante está seca.
- Seleccionar un tamaño de apósito adecuado que cubra la herida y solape sus bordes. **(A)**
- Abrir el sobre y sacar el apósito. Garantizar la esterilidad.
- Desprender la lámina protectora **(B)** y colocar el apósito con la cara adherente hacia la herida. **(C)**
- No estirar el vendaje.
- Utilizar una fijación adicional para el apósito.
- En caso necesario, Cutimed® Siltec® PLUS Heel se puede usar con otros apósitos como, ej., Cutimed® Sorbact® (en el caso de heridas infectadas) o Cutimed® Gel (para las heridas secas y necróticas).
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel se puede aplicar sobre una herida infectada en combinación con una terapia antimicrobiana bajo supervisión médica.
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel puede permanecer en la herida durante varios días según el estado de la herida y los niveles de exudación. Se recomienda cambiar el apósito cada 24 horas al principio, e ir disminuyendo la frecuencia del cambio según se requiera.
- Retirar cuidadosamente la fijación del apósito y quitar con suavidad el apósito Cutimed® Siltec® PLUS Heel de la herida y desechoarlo.
- Si fuera necesario, limpiar la herida antes de aplicar un nuevo apósito.

**Almacenamiento**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel se debe guardar en un lugar seco. No exponerlo a la luz directa del sol.

Fecha: Junio de 2016

Istruzioni per l'uso

I

**Cutimed® Siltec® PLUS Heel****Descrizione del prodotto**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel è un assortimento di medicazioni in gommapiuma siliconica. Cutimed® Siltec® PLUS Heel è una medicazione a schiuma in poliuretano assorbente e sterile per il cambio traumatico delle medicazioni contenente strisce superassorbenti che assorbono e trattengono l'essudato. La superficie di contatto con la ferita è composta da uno strato di silicone perforato che permette un'aderenza alla cute perilesionale ma non al letto umido della ferita né al tessuto epiteliale di nuova formazione. Ciò minimizza il trauma e il dolore durante i cambi di medicazione. La pellicola esterna è idrorepellente, ma allo stesso tempo permeabile a ossigeno e vapore. La medicazione in gommapiuma e le strisce superassorbenti sono progettate per assorbire e trattenerne nella medicazione l'essudato della ferita, mantenendo un ambiente umido nella lesione e minimizzando il rischio di macerazione. Cutimed® Siltec® PLUS Heel fornisce protezione all'area della ferita senza lasciare. Residui nella stessa. La medicazione trattiene efficacemente l'essudato, anche sotto compressione. Se necessario, la medicazione può essere tagliata a misura. Cutimed® Siltec® PLUS Heel è sagomata per le lesioni tallonari, aderisce delicatamente alla cute perilesionale e resta in posizione applicando un semplice fissaggio secondario.

**Indicazioni**

L'assortimento Cutimed® Siltec® PLUS Heel è indicato per ferite essudanti quali: ulcere venose e arteriose, lesioni da pressione, cancrene diabetiche, incisioni chirurgiche, trapianti cutanei e siti donatori, lacerazioni o abrasioni. Cutimed® Siltec® PLUS Heel è raccomandato per ferite con livelli di essudato da lieve ad elevato.

**Controindicazioni**

Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota a uno componenti del prodotto.

**Avvertenze e precauzioni**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel è un dispositivo monouso. Non riutilizzare né risterilizzare per evitare rischi di trasmissione di fluidi corporei tra pazienti. Non utilizzare se il confezionamento primario non è integro. Non utilizzare residui di medicazione. Controllare che la ferita non presenti segni di infezione e, eventualmente, trattarla secondo il protocollo in uso per le lesioni infette. Per solo uso esterno. Non utilizzare con soluzioni ossidanti come ipoclorito o perossido di idrogeno. Rimuovere la medicazione prima della radioterapia.

**Istruzioni per l'uso**

- Detergere la ferita secondo il protocollo in uso.
- Zorg ervoor dat de huid oeromheen droog is.
- Scegliere la dimensione di medicazione idonea a coprire la ferita in modo da sovrapporsi ai margini. **(A)**
- Aprire la confezione ed estrarre la medicazione. Garantire la sterilità.
- Rimuovere la pellicola protettiva **(B)** e applicare con il lato adesivo verso la ferita. **(C)**
- Evitare tensioni della medicazione.
- Applicare un adeguato fissaggio.
- Se necessario, Cutimed® Siltec® PLUS Heel può essere utilizzata in associazione con altre medicazioni, quali Cutimed® Sorbact® (in caso di ferite infette) o Cutimed® Gel (per ferite secche e/o necrotiche).
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel può essere utilizzata su ferite infette in aggiunta a terapia antimicrobica sotto supervisione medica.
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel può rimanere in situ per un massimo di sette giorni, in funzione delle condizioni della lesione e del livello di essudato. Si raccomanda di cambiare la medicazione inizialmente ogni 24 ore per arrivare poi a cambi meno frequenti.
- Rimuovere con attenzione il fissaggio della medicazione e togliere delicatamente Cutimed® Siltec® PLUS Heel dalla ferita via.
- Se necessario, detergere e asciugare la ferita prima di applicare una nuova medicazione.

**Conservazione**

Conservare Cutimed® Siltec® PLUS Heel in ambiente asciutto. Non esporre alla luce solare diretta.

Data: Giugno 2016

Aanwijzingen voor het gebruik

NL

**Cutimed® Siltec® PLUS Heel****Productbeschrijving**

Het Cutimed® Siltec® PLUS Heel-verband is een assortiment schuimverbanden met een siliconen laag. Cutimed® Siltec® PLUS Heel is een steriele, absorberende polyurethaan schuimlaag voor traumatische verbandwissels met superabsorberende strips die wondexudaat absorberen en insluiten. Het wondcontactoppervlak is een geperforeerde siliconen laag die licht kleeft aan de gezonde huid, maar niet aan het vochtige wondbed of nieuw gevormd epithelium. Hierdoor worden trauma en pijn tijdens het verwisselen van het verband geminimaliseerd. De buitenlaag is waterafstotend, maar laat zuurstof en waterdamp door. Het schuimverband en de superabsorberende strips zijn ontworpen om grote hoeveelheden wondvocht te absorberen en in te sluiten in het verband. Hierbij wordt gezorgd voor een vochtige wondomgeving en het risico op maceratie wordt geminimaliseerd. Cutimed® Siltec® PLUS Heel is zeer comfortabel en biedt bescherming aan het wondgebied. Cutimed® Siltec® PLUS Heel laat geen resten achter in de wond. Het verband houdt op betrouwbare wijze wondexudaat vast, zelfs als het wordt gebruikt onder compressie. Indien nodig kan het verband op maat worden geknipt. Cutimed® Siltec® PLUS Heel is anatomisch gevormd voor de behandeling van wonden op de hiel, hecht zacht aan de huid die de wond omringt en blijft op z'n plaats tijdens het aanbrengen van een tweede fixatie.

**Indicaties**

Het Cutimed® Siltec® PLUS Heel assortiment is geïndiceerd voor open wonden zoals: veneuze en arteriële ulcus, drukulcus, diabetische gangreen, chirurgische incisies, huidtransplantaten en donorplaatsen, snijwonden of schaafwonden. Cutimed® Siltec® PLUS Heel wordt aanbevolen voor wonden met lage tot hoge exsudaatniveau's.

**Contra-indicaties**

Niet gebruiken bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor een van de productcomponenten.

**Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel is verpakt voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken of steriliseren omdat er een risico bestaat dat lichaamsvloeistoffen of verontreinigd weefsel wordt overgedragen tussen patiënten. Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is. Geopende of ongebruikte delen van het product wegwerpen. De wond moet onderzocht worden op tekenen van infectie en bij het vaststellen hiervan behandeld worden volgens de klinische norm. Alleen voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken met oxiderende oplossingen zoals hypochloriet of waterstofperoxide. Verwijder het verband voor radiotherapie.

**Aanwijzingen voor gebruik**

- Maak de wond volgens correct klinisch gebruik schoon.
- Certificee-se de que a área da pele circundante está seca.
- Kies de juiste maat verband die de wond bedekt en de wondranden overlapt. **(A)**
- Open de verpakking en haal het verband eruit. Zorg dat het verband steriel blijft.
- Verwijder beschermplaat **(B)** en breng het verband aan met de kleefzijde naar de wond gericht. **(C)**
- Het verband niet optrekken.
- Breng extra fixerend verband aan.
- Indien nodig kan Cutimed® Siltec® PLUS Heel gebruikt worden in combinatie met andere verbanden zoals Cutimed® Sorbact (bij geïnfecteerde wonden) of Cutimed® Gel (voor droge, necrotische wonden).
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel kan worden gebruikt bij een geïnfecteerde wond, als aanvulling op een anti-bacteriologische behandeling onder medisch toezicht.
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel kan tot ongeveer zeven dagen op de wond blijven zitten, afhankelijk van de wondconditie en exsudaat niveau's. Het wordt aanbevolen het verband in het begin elke 24 uur te vervangen; later kan deze frequentie verlaagd worden naar behoefte.
- Verwijder Cutimed® Siltec® PLUS Heel voorzichtig van de wond.
- Indien nodig reinigt u de wond voordat u een nieuw verband aanbrengt.

**Bewaren**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel dient droog bewaard te worden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Versie: Juni 2016

Instruções de Utilização

P

**Cutimed® Siltec® PLUS Heel****Descrição do produto**

Os pensos Cutimed® Siltec® PLUS Heel consistem numa variedade de pensos de espuma revestidos com silicone. Cutimed® Siltec® PLUS Heel é um penso de espuma de poliuretano absorvente e esterilizado para mudanças de penso traumáticas que contém tiras superabsorventes que absorvem e estancam a exsudação da ferida. A superfície de contacto com a ferida é constituída por uma camada de silicone perfurada que adere à pele em volta da ferida, mas não ao leito húmido da ferida ou ao tecido epitelial recentemente formado. Isto reduz o traumatismo e a dor durante as mudanças de penso. A película exterior é resistente à água, mas permeável ao oxigénio e ao vapor.

O penso de espuma e as tiras superabsorventes destinam-se a absorver e estancar qualquer líquido excedente da ferida no interior do penso, promovendo um ambiente húmido na ferida e reduzindo o risco de maceração. Cutimed® Siltec® PLUS Heel é extremamente confortável e protege a área da ferida. Cutimed® Siltec® PLUS Heel não deixa resíduos na ferida. O penso retém garantidamente o exsudato da ferida, mesmo com ligaduras de compressão. Se necessário, o tamanho do penso pode ser cortado. Cutimed® Siltec® PLUS Heel é moldado anatomicamente para o tratamento de feridas no calcanhar, adere suavemente à pele periférica e permanece no lugar enquanto uma fixação secundária é aplicada.

**Indicações**

O penso Cutimed® Siltec® PLUS Heel é indicado para feridas com exsudado, tais como: úlceras arteriais e venosas, úlceras de pressão, gangrenas diabéticas, incisões cirúrgicas, enxertos cutâneos e locais dadores, lacerações ou escoriações. Cutimed® Siltec® PLUS Heel é recomendado para feridas com níveis de exsudação baixa a elevada.

**Contra-indicações**

Não utilize em pacientes com uma sensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do produto.

**Advertências e precauções**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel encontra-se embalado para utilização única. Não reutilize nem volte a esterilizar para evitar o risco de transmissão de fluidos corporais ou tecido contaminado entre pacientes. Não utilize se a bolsa estiver aberta ou danificada. Elimine material aberto ou não utilizado do dispositivo. Verifique se a ferida apresenta sinais de infeção e trate-a de acordo com as práticas clínicas. Exclusivamente para uso externo. Não utilize com soluções oxidantes, tais como hipoclorito ou peróxido de hidrogénio. Remova o penso antes de uma sessão de radioterapia.



**Instruções para utilização**

- Limpe a ferida de acordo com as boas práticas clínicas.
- Certifique-se de que a área da pele circundante está seca.
- Escolha um penso de tamanho adequado que cubra a ferida e se sobreponha aos limites da mesma. **(A)**
- Abra a bolsa e retire o penso. Certifique-se de que está esterilizado.
- Remova a película de proteção **(B)** e aplique-a com o lado aderente voltado para a ferida. **(C)**
- Evite esticar o penso.
- Aplique a fixação adicional do penso.
- Se necessário, o Cutimed® Siltec® PLUS Heel pode ser utilizado em combinação com outros pensos, por ex., Cutimed® Sorbact® (em caso de feridas infectadas) ou Cutimed® Gel (para feridas secas e necróticas).
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel pode ser utilizado numa ferida infectada para além de terapia antimicrobiana, sob supervisão médica.
- Cutimed® Siltec® PLUS Heel pode permanecer no local da ferida durante, no máximo, sete dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis de exsudado. Recomenda-se que, inicialmente, o penso seja mudado a cada 24 horas e, posteriormente, seja mudado cada vez com menos frequência conforme necessário.
- Remova cuidadosamente da ferida a fixação do penso e o Cutimed® Siltec® PLUS Heel, eliminando-os.
- Se necessário, limpe a ferida antes de aplicar um novo penso.


**Armazenamento**

Cutimed® Siltec® PLUS Heel deve ser guardado num ambiente seco. Não exponha directamente à luz do sol.

Data: Junho de 2016

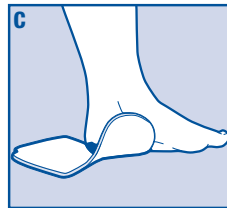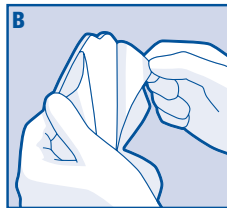

**Cutimed® Siltec® PLUS Heel is appropriate for use in:**  
**Cutimed® Siltec® PLUS Heel est adapté pour le traitement des:**  
**Cutimed® Siltec® PLUS Heel es apropiado para:**

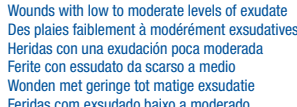

**Cutimed® Siltec® PLUS Heel è adatto per:**  
**Cutimed® Siltec® PLUS Heel is geschikt voor:**  
**Cutimed® Siltec® PLUS Heel é adequado para:**

STERILE EO

CE 0124



Do not re-use



Do not sterilize



Keep away from sunlight



Keep dry



Caution!



Do not use if package is damaged.  
 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.  
 No usar si el envase presenta daños.  
 Non utilizzare se la confezione è danneggiata.  
 Bij beschadigde verpakking niet gebruiken.  
 Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

**BSN** medical

**Made and sterilized in Germany**

® = registered trademark

**BSN medical GmbH**  
**Quickbornstrasse 24**  
**20253 Hamburg · Germany**

