

Instructions for Use

**Cutimed® Siltec® PLUS**

ENG

**Product description**

Cutimed® Siltec® PLUS dressings are an assortment of silicone coated foam dressings. Cutimed® Siltec® PLUS is a sterile, absorbent polyurethane foam dressing for traumatic dressing changes that contains super-absorbent strips which absorb and lock wound exudate. The wound contact surface is a perforated silicone layer that allows adherence to the peri-wound skin but not to the moist wound bed or to newly formed epithelial tissue. This minimises trauma and pain during dressing changes. The outer film is water-repellent, yet permeable to oxygen and vapour. The foam dressing and the super-absorbent strips are designed to absorb and to lock away excess wound fluid inside the dressing, promoting a moist wound environment and minimising the risk of maceration. Cutimed® Siltec® PLUS is highly conformable and provides protection of the wound site. Cutimed® Siltec® PLUS leaves no residues in the wound. The dressing reliably retains wound exudate, even under compression. If necessary the dressing can be cut to size. Cutimed® Siltec® PLUS gently adheres to the peri-wound skin and stays in place while secondary fixation is applied.

**Indications**

The Cutimed® Siltec® PLUS assortment is indicated for exuding wounds such as: venous and arterial ulcers, pressure ulcers, diabetic gangrenes, surgical incisions, skin grafts and donor sites, lacerations or abrasions. Cutimed® Siltec® PLUS is recommended for wounds with low to high exudate levels.

**Contraindications**

Do not use on patients with a known sensitivity to any of the product components.

**Warnings and precautions**

Cutimed® Siltec® PLUS is packaged for single use. Do not re-use or re-sterilise as there is a risk of transmission of body fluids or contaminated tissue between patients. Do not use if pouch is open or damaged. Discard open or unused material. The wound should be inspected for signs of infection and treated according to clinical practice if required. For external use only. Do not use with oxidising solutions such as hypochlorite or hydrogen peroxide. Remove the dressing prior radiation therapy.

**Directions for use**

- Clean the wound according to good clinical practice.
- Make sure, the surrounding skin is dry.
- Choose an appropriate dressing size that covers the wound and overlaps the wound edges. **(A)**
- Open the pouch and take out the dressing. Ensure sterility.
- Remove protective film **(B)** and apply with the adherent side towards the wound. **(C)**
- Avoid stretching the dressing.
- Apply additional dressing fixation.
- If necessary, Cutimed® Siltec® PLUS can be used in combination with other dressings e.g. Cutimed® Sorbact® (in case of infected wounds) or Cutimed® Gel (for dry, necrotic wounds).
- Cutimed® Siltec® PLUS may be used on an infected wound in addition to antimicrobial therapy under medical supervision.
- Cutimed® Siltec® PLUS can remain in place for up to seven days, depending on wound conditions and exudate levels. It is recommended to change the dressing every 24 hours initially, moving to less frequent changes as necessary.
- Carefully remove any additional dressing fixation and gently remove Cutimed® Siltec® PLUS from the wound and discard.
- If required, cleanse the wound prior to application of a new dressing.

**Storage**

Cutimed® Siltec® PLUS should be stored in dry conditions. Do not expose to direct sunlight.

Date: June 2016

Notice d'emploi

**Cutimed® Siltec® PLUS**

F

**Description du produit**

Les pansements Cutimed® Siltec® PLUS sont un assortiment de pansements revêtus de silicone. Cutimed® Siltec® PLUS est un pansement stérile absorbant en polyuréthane conçu pour des changements de pansement traumatiques, contenant des bandes super-absorbantes qui absorbent et retiennent l'exsudat de la plaie. La surface de contact avec la plaie est une couche perforée de silicone assurant une adhérence à la peau périphérique sans adhérer au lit de la plaie humide ou au tissu épidermique nouvellement formé. Cela permet de limiter les traumatismes et la douleur lors des changements de pansements. Le film extérieur est résistant à l'eau mais perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau. Le pansement en mousse et les bandes super-absorbantes sont conçus pour absorber les fluides excédentaires de la plaie et les retenir dans le pansement, créant ainsi un environnement humide favorable à la cicatrisation de la plaie en minimisant le risque de macération. Cutimed® Siltec® PLUS est hautement conformable et assure la protection du site de la plaie. Cutimed® Siltec® PLUS ne laisse aucun résidu dans la plaie. Le pansement assure une retenue fiable de l'exsudat de la plaie, même sous des bandages de compression. Si nécessaire, le pansement peut être découpé à la taille voulue. Cutimed® Siltec® PLUS adhère en douceur à la peau périphérique et reste en place pendant l'application d'un pansement de fixation supplémentaire.

**Indications**

L'assortiment Cutimed® Siltec® PLUS est indiqué pour le traitement des plaies exsudatives telles que : ulcères veineux et artériels, ulcères de pression, gangrènes diabétiques, incisions chirurgicales, greffes de peau et sites donneurs, lacerations ou abrasions. Cutimed® Siltec® PLUS est recommandé pour le traitement des plaies avec exsudat faible à élevé.

**Contre-indications**

Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue à l'un des composants du pansement.

**Mises en garde et précautions d'emploi**

Chaque pansement Cutimed® Siltec® PLUS est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser ou restériliser afin d'éviter tout risque de transmission de fluides corporels ou de tissus contaminés entre les patients. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Éliminer tout matériel ouvert ou non utilisé. Il convient d'examiner la plaie pour détecter les signes d'infection et, le cas échéant, de les traiter conformément au protocole clinique habituel. Uniquement destiné à un usage externe. Ne pas utiliser avec des solutions oxydantes telles que l'hypochlorite ou le peroxyde d'hydrogène. Retirer le pansement avant administration d'une radiothérapie.

**Mode d'emploi**

- Nettoyer la plaie selon le protocole habituel.
- S'assurer que la peau qui entoure la plaie soit sèche.
- Choisir une dimension de pansement appropriée, qui couvre la lésion et dépasse des bords de la plaie. **(A)**
- Ouvrir l'emballage et retirer le pansement. Utiliser une technique stérile.
- Retirer le film de protection **(B)** et appliquer le pansement avec le côté adhésif vers la plaie. **(C)**
- Ne pas étirer le pansement.
- Appliquer un pansement de fixation supplémentaire.
- Si nécessaire, Cutimed® Siltec® PLUS peut être utilisé en combinaison avec d'autres pansements tels que : Cutimed® Sorbact® (pour les plaies infectées) ou Cutimed® Gel (pour les plaies sèches ou nécrotiques).
- Cutimed® Siltec® PLUS peut être utilisé sur une plaie infectée en complément d'un traitement antimicrobien, sous contrôle médical.
- Cutimed® Siltec® PLUS peut rester en place jusqu'à sept jours, en fonction de l'état de la plaie et de la quantité d'exsudat. Il est recommandé de changer le pansement toutes les 24 heures au départ, et de procéder à des changements moins fréquents selon les besoins.
- Retirer avec précaution le pansement de fixation puis retirer délicatement le pansement Cutimed® Siltec® PLUS du lit de la plaie. Jeter le pansement usagé.
- Si nécessaire, nettoyer la plaie avant d'appliquer un nouveau pansement.

**Entreposage**

Cutimed® Siltec® PLUS doit être stocké à l'abri de l'humidité. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Date : Juin 2016

Indicaciones para el uso

**Cutimed® Siltec® PLUS**

E

**Descripción del producto**

Los apósitos Cutimed® Siltec® PLUS son una gama de apósitos de espuma recubiertos de silicona. Cutimed® Siltec® PLUS es un apósito de espuma de poliuretano absorbente con el que se consigue realizar cambios traumáticos de apósito y que contiene bandas superabsorbentes que absorben y retienen el exudado de la herida. La superficie de contacto con la herida es una capa perforada de silicona, que permite la adherencia a la piel que rodea la herida y no al lecho húmedo de la herida ni al tejido epitelial recién formado. Esto minimiza el trauma y el dolor durante los cambios del apósito. La película exterior es repelente al agua, pero permeable al oxígeno y al vapor. El apósito de espuma y las bandas superabsorbentes se han diseñado para absorber y retener dentro del apósito el exceso de exudado, favoreciendo un ambiente húmedo y minimizando el riesgo de maceración. Cutimed® Siltec® PLUS es altamente adaptable y proporciona protección al lugar de la herida. Cutimed® Siltec® PLUS no deja residuos. El apósito retiene de manera segura el exudado de la herida, incluso bajo vendajes compresivos. El apósito puede cortarse a la medida necesaria. Cutimed® Siltec® PLUS se adhiere suavemente a la piel que rodea la herida y se mantiene inmóvil mientras se aplica la segunda fijación.

**Indicaciones**

La gama de apósitos Cutimed® Siltec® PLUS está indicada para heridas exudativas tales como: úlceras venosas y arteriales, úlceras por presión, gangrenas diabéticas, incisiones quirúrgicas, injertos cutáneos, zonas donantes, laceraciones y abrasiones. Cutimed® Siltec® PLUS está recomendado para heridas con un nivel de exudación de bajo a alto.

**Contraindicaciones**

No utilizar el producto en pacientes con sensibilidad conocida a uno de sus componentes.

**Advertencias y precauciones**

El apósito Cutimed® Siltec® PLUS está envasado para un solo uso. No se debe reutilizar ni reesterilizar, ya que existe riesgo de transmisión de pacientes de fluidos corporales o tejidos contaminados. No utilizarlo si el empaque está abierto o dañado. Eliminar cualquier elemento del producto abierto o no utilizado. La herida debe ser examinada para determinar si hay signos de infección y, dado el caso, se debe tratar conforme a la práctica clínica. Sólo para uso externo. No utilizar con soluciones oxidantes como el hipoclorito o el peróxido de hidrógeno. Retirar el apósito antes de aplicar radiación.

**Instrucciones de uso**

- Limpiar la herida conforme a la buena práctica clínica.
- Asegurarse de que la piel circundante está seca.
- Seleccionar un tamaño de apósito adecuado que cubra la herida y solape sus bordes. **(A)**
- Abrir el sobre y sacar el apósito. Garantizar la esterilidad.
- Desprender la lámina protectora **(B)** y colocar el apósito con la cara adherente hacia la herida. **(C)**
- No estirar el vendaje.
- Utilizar una fijación adicional para el apósito.
- En caso necesario, Cutimed® Siltec® PLUS se puede usar con otros apósitos como, ej., Cutimed® Sorbact® (en el caso de heridas infectadas) o Cutimed® Gel (para las heridas secas y necróticas).
- Cutimed® Siltec® PLUS se puede aplicar sobre una herida infectada en combinación con una terapia antimicrobiana bajo supervisión médica.
- Cutimed® Siltec® PLUS puede permanecer en la herida durante varios días según el estado de la herida y los niveles de exudación. Se recomienda cambiar el apósito cada 24 horas al principio, e ir disminuyendo la frecuencia del cambio según se requiera.
- Retirar cuidadosamente la fijación del apósito y quitar con suavidad el apósito Cutimed® Siltec® PLUS de la herida y desecharlo.
- Si fuera necesario, limpiar la herida antes de aplicar un nuevo apósito.

**Almacenamiento**

Cutimed® Siltec® PLUS se debe guardar en un lugar seco. No exponerlo a la luz directa del sol.

Fecha: Junio de 2016

Istruzioni per l'uso

**Cutimed® Siltec® PLUS**

I

**Descrizione del prodotto**

Cutimed® Siltec® PLUS è un assortimento di medicazioni in gommapiuma siliconica. Cutimed® Siltec® PLUS è una medicazione a schiuma in poliuretano assorbente e sterile per il cambio traumatico delle medicazioni contenente strisce superassorbenti che assorbono e trattengono l'essudato. La superficie di contatto con la ferita è composta da uno strato di silicone perforato che permette un'aderenza alla cute perilesionale ma non al letto umido della ferita né al tessuto epiteliale di nuova formazione. Ciò minimizza il trauma e il dolore durante i cambi di medicazione. La pellicola esterna è idrorepellente, ma allo stesso tempo permeabile a ossigeno e vapore. La medicazione in gommapiuma e le strisce superassorbenti sono progettate per assorbire e trattenerne nella medicazione l'essudato della ferita, mantenendo un ambiente umido nella lesione e minimizzando il rischio di macerazione. Cutimed® Siltec® PLUS fornisce protezione all'area della ferita senza lasciare. Residui nella stessa. La medicazione trattiene efficacemente l'essudato, anche sotto compressione. Se necessario, la medicazione può essere tagliata a misura. Cutimed® Siltec® PLUS aderisce delicatamente alla cute perilesionale e resta in posizione applicando un semplice fissaggio secondario.

**Indicazioni**

L'assortimento Cutimed® Siltec® PLUS è indicato per ferite essudanti quali: ulcere venose e arteriose, lesioni da pressione, cancrene diabetiche, incisioni chirurgiche, trapianti cutanei e siti donatori, lacerazioni o abrasioni. Cutimed® Siltec® PLUS è raccomandato per ferite con livelli di essudato da lieve ad elevato.

**Controindicazioni**

Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota a uno componenti del prodotto.

**Avvertenze e precauzioni**

Cutimed® Siltec® PLUS è un dispositivo monouso. Non riutilizzare né risterilizzare per evitare rischi di trasmissione di fluidi corporei tra pazienti. Non utilizzare se il confezionamento primario non è integro. Non utilizzare residui di medicazione. Controllare che la ferita non presenti segni di infezione ed, eventualmente, trattarla secondo il protocollo in uso per le lesioni infette. Per solo uso esterno. Non utilizzare con soluzioni ossidanti come ipoclorito o perossido di idrogeno. Rimuovere la medicazione prima della radioterapia.

**Istruzioni per l'uso**

- Detergere la ferita secondo il protocollo in uso.
- Assicurarsi che la cute perilesionale sia asciutta.
- Scegliere la dimensione di medicazione idonea a coprire la ferita in modo da sovrapporsi ai margini. **(A)**
- Aprire la confezione ed estrarre la medicazione. Garantire la sterilità.
- Rimuovere la pellicola protettiva **(B)** e applicare con il lato adesivo verso la ferita. **(C)**
- Evitare tensioni della medicazione.
- Applicare un adeguato fissaggio.
- Se necessario, Cutimed® Siltec® PLUS può essere utilizzata in associazione con altre medicazioni, quali Cutimed® Sorbact® (in caso di ferite infette) o Cutimed® Gel (per ferite secche e/o necrotiche).
- Cutimed® Siltec® PLUS può essere utilizzata su ferite infette in aggiunta a terapia antimicrobica sotto supervisione medica.
- Cutimed® Siltec® PLUS può rimanere in situ per un massimo di sette giorni, in funzione delle condizioni della lesione e del livello di essudato. Si raccomanda di cambiare la medicazione inizialmente ogni 24 ore per arrivare poi a cambi meno frequenti.
- Rimuovere con attenzione il fissaggio della medicazione e togliere delicatamente Cutimed® Siltec® PLUS dalla ferita via.
- Se necessario, detergere e asciugare la ferita prima di applicare una nuova medicazione.

**Conservazione**

Conservare Cutimed® Siltec® PLUS in ambiente asciutto. Non esporre alla luce solare diretta.

Data: Giugno 2016

Aanwijzingen voor het gebruik

**Cutimed® Siltec® PLUS**

NL

**Productbeschrijving**

Cutimed® Siltec® PLUS-verband is een assortiment schuimverbanden met een siliconen laag. Cutimed® Siltec® PLUS is een steriele, absorberende polyurethaan schuimlaag voor traumatische verbandwissels met superabsorberende strips die wondexudaat absorberen en insluiten. Het wondcontactoppervlak is een geperforeerde siliconen laag die licht kleeft aan de gezonde huid, maar niet aan het vochtige wondbed of nieuw gevormd epitheliale weefsel. Hierdoor worden trauma en pijn tijdens het verwisselen van het verband geminimaliseerd. De buitenlaag is waterafstotend, maar laat zuurstof en waterdamp door. Het schuimverband en de superabsorberende strips zijn ontworpen om grote hoeveelheden wondvocht te absorberen en in te sluiten in het verband. Hierbij wordt gezorgd voor een vochtige wondomgeving en het risico op maceratie wordt geminimaliseerd. Cutimed® Siltec® PLUS is zeer comfortabel en biedt bescherming aan het wondgebied. Cutimed® Siltec® PLUS laat geen resten achter in de wond. Het verband houdt op betrouwbare wijze wondexudaat vast, zelfs als het wordt gebruikt onder compressie. Indien nodig kan het verband op maat worden geknipt. Cutimed® Siltec® PLUS hecht zacht aan de huid die de wond omringt en blijft op z'n plaats wanneer een tweede fixatie wordt aangebracht.

**Indicaties**

Het Cutimed® Siltec® PLUS assortiment is geïndiceerd voor open wonden zoals: veneuze en arteriële ulcus, drukulcus, diabetische gangreen, chirurgische incisies, huidtransplantaten en donorplaatsen, slijwonden of scharafwonden. Cutimed® Siltec® PLUS wordt aanbevolen voor wonden met lage tot hoge exsudatniveaus.

**Contra-indicaties**

Niet gebruiken bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor een van de productcomponenten.

**Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen**

Cutimed® Siltec® PLUS is verpakt voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken of steriliseren omdat er een risico bestaat dat lichaamsvloeistoffen of verontreinigd weefsel wordt overgedragen tussen patiënten. Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is. Geopende of ongebruikte delen van het product wegwerpen. De wond moet onderzocht worden op tekenen van infectie en bij het vaststellen hiervan behandeld worden volgens de klinische norm. Alleen voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken met oxiderende oplossingen zoals hypochloriet of waterstofperoxide. Verwijder het verband voor radiotherapie.

**Aanwijzingen voor gebruik**

- Maak de wond volgens correct klinisch gebruik schoon.
- Zorg ervoor dat de huid omlenhen droog is.
- Kies de juiste maat verband die de wond bedekt en de wondranden overlapt. **(A)**
- Open de verpakking en haal het verband eruit. Zorg dat het verband steriel blijft.
- Verwijder beschermplaat **(B)** en breng het verband aan met de kleefzijde naar de wond gericht. **(C)**
- Het verband niet optrekken.
- Breng extra fixerend verband aan.
- Indien nodig kan Cutimed® Siltec® PLUS gebruikt worden in combinatie met andere verbanden zoals Cutimed® Sorbact (bij geïnfecteerde wonden) of Cutimed® Gel (voor droge, necrotische wonden).
- Cutimed® Siltec® PLUS kan worden gebruikt bij een geïnfecteerde wond, als aanvulling op een anti-bacteriologische behandeling onder medisch toezicht.
- Cutimed® Siltec® PLUS kan tot ongeveer zeven dagen op de wond blijven zitten, afhankelijk van de wondconditie en exsudatie niveaus. Het wordt aanbevolen het verband in het begin elke 24 uur te vervangen; later kan deze frequentie verlaagd worden naar behoefte.
- Verwijder Cutimed® Siltec® PLUS voorzichtig van de wond.
- Indien nodig reinigt u de wond voordat u een nieuw verband aanbrengt.

**Bewaren**

Cutimed® Siltec® PLUS dient droog bewaard te worden. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Versie: Juni 2016

Instruções de Utilização

**Cutimed® Siltec® PLUS**

P

**Descrição do produto**

Os pensos Cutimed® Siltec® PLUS consistem numa variedade de pensos de espuma revestidos com silicone. Cutimed® Siltec® PLUS é um penso de espuma de poliuretano absorbente e esterilizado para mudanças de penso traumáticas que contém tiras superabsorventes que absorvem e estancam a exsudação da ferida. A superfície de contacto com a ferida é constituída por uma camada de silicone perfurada que adere à pele em volta da ferida, mas não ao leito húmido da ferida ou ao tecido epitelial recentemente formado. Isto reduz o traumatismo e a dor durante as mudanças de penso. A película exterior é resistente à água, mas permeável ao oxigénio e ao vapor. O penso de espuma e as tiras superabsorventes destinam-se a absorver e estancar qualquer fluido excedente da ferida no interior do penso, promovendo um ambiente húmido na ferida e reduzindo o risco de maceração. Cutimed® Siltec® PLUS é extremamente confortável e protege a área da ferida. Cutimed® Siltec® PLUS não deixa resíduos na ferida. O penso retém garantidamente o exsudato da ferida, mesmo com ligaduras de compressão. Se necessário, o tamanho do penso pode ser cortado. Cutimed® Siltec® PLUS adere suavemente à pele periférica e permanece no lugar enquanto uma fixação secundária é aplicada.

**Indicações**

O penso Cutimed® Siltec® PLUS é indicado para feridas com exsudado, tais como: úlceras arteriais e venosas, úlceras de pressão, gangrenas diabéticas, incisões cirúrgicas, enxertos cutâneos e locais dadores, lacerações ou escoriações. Cutimed® Siltec® PLUS é recomendado para feridas com níveis de exsudação baixa a elevada.

**Contra-indicações**

Não utilize em pacientes com uma sensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do produto.

**Advertências e precauções**

Cutimed® Siltec® PLUS encontra-se embalado para utilização única. Não reutilize nem volte a esterilizar para evitar o risco de transmissão de fluidos corporais ou tecido contaminado entre pacientes. Não utilize se a bolsa estiver aberta ou danificada. Elimine material aberto ou não utilizado do dispositivo. Verifique se a ferida apresenta sinais de infecção e trate-a de acordo com as práticas clínicas. Exclusivamente para uso externo. Não utilize com soluções oxidantes, tais como hipoclorito ou peróxido de hidrogénio. Remova o penso antes de uma sessão de radioterapia.




**Instruções para utilização**

- Limpe a ferida de acordo com as boas práticas clínicas.
- Certifique-se de que a área da pele circundante está seca.
- Escolha um penso de tamanho adequado que cubra a ferida e se sobreponha aos limites da mesma. **(A)**
- Abra a bolsa e retire o penso. Certifique-se de que está esterilizado.
- Remova a película de protecção **(B)** e aplique-a com o lado aderente voltado para a ferida. **(C)**
- Evite esticar o penso.
- Aplique a fixação adicional do penso.
- Se necessário, o Cutimed® Siltec® PLUS pode ser utilizado em combinação com outros pensos, por ex., Cutimed® Sorbact® (em caso de feridas infectadas) ou Cutimed® Gel (para feridas secas e necróticas).
- Cutimed® Siltec® PLUS pode ser utilizado numa ferida infectada para além de terapia antimicrobiana, sob supervisão médica.
- Cutimed® Siltec® PLUS pode permanecer no local da ferida durante, no máximo, sete dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis de exsudato. Recomenda-se que, inicialmente, o penso seja mudado a cada 24 horas e, posteriormente, seja mudado cada vez com menos frequência conforme necessário.
- Remova cuidadosamente da ferida a fixação do penso e o Cutimed® Siltec® PLUS, eliminando-os.
- Se necessário, limpe a ferida antes de aplicar um novo penso.

**Armazenamento**

Cutimed® Siltec® PLUS deve ser guardado num ambiente seco. Não exponha directamente à luz do sol.

Data: Junho de 2016

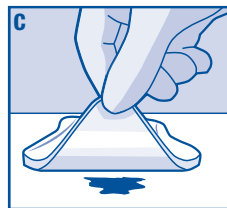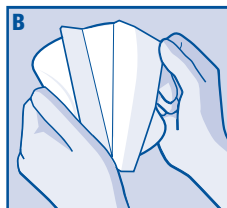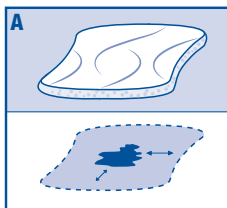

**Cutimed® Siltec® PLUS is appropriate for use in:  
Cutimed® Siltec® PLUS est adapté pour le traitement des:  
Cutimed® Siltec® PLUS es apropiado para:**



superficial wounds  
des plaies superficielles  
heridas superficiales  
ferite superficiali  
oppervlakkige wonden  
feridas superficiais



Wounds with low to moderate levels of exudate  
Des plaies faiblement à modérément exsudatives  
Heridas con una exudación poca moderada  
Ferite con essudato da scarso a medio  
Wonden met geringe tot matige exsudatie  
Feridas com exsudado baixo a moderado



Wounds with moderate to high levels of exudate  
Les plaies modérément à fortement exsudatives  
Heridas con una exudación de moderada a alta  
Ferite con essudato da moderato a forte  
Wonden met matige tot grote hoeveelheid exsudaat  
Feridas com exsudado moderado a alto

STERILE EO

CE 0124



Do not re-use

Do not resterilize

Keep away from sunlight

Keep dry

Caution!



Do not use if package is damaged.  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.  
No usar si el envase presenta daños.  
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.  
Bij beschadigde verpakking niet gebruiken.  
Nao utilizar se a embalagem estiver danificada.

BSN medical

**Made and sterilized in Germany**

® = registered trademark

**BSN medical GmbH**  
Quickbornstrasse 24  
20253 Hamburg · Germany

16571-90048-00 / ABR09153.01

Instruções de uso

## Cutimed® Siltec® PLUS

**P**

Brasil

### Descrição do produto

Cutimed® Siltec® PLUS é um sortimento de curativos de espuma siliconada. Cutimed® Siltec® PLUS é um curativo de espuma de poliuretano estéril e absorvente para trocas de curativos traumáticas, contendo listras superabsorventes que absorvem e contêm o exsudado da ferida. A superfície de contato da ferida é uma camada de silicone perfurado que permite a aderência à pele da periferida, mas não ao leito da ferida úmida ou ao tecido epitelial recém-formado. Isto minimiza o trauma e a dor durante as trocas de curativos. O filme externo é à prova d'água, mas permeável a oxigênio e vapor. O curativo de espuma e as listras superabsorventes foram projetados para absorver e conter fluido excessivo da ferida dentro do curativo, promovendo um ambiente de ferida úmido e minimizando o risco de maceração. Cutimed® Siltec® PLUS é altamente conformável e fornece proteção do local da ferida. Cutimed® Siltec® PLUS não deixa resíduos na ferida. O curativo mantém o exsudato da ferida, mesmo sob ataduras elásticas. Se necessário, o curativo pode ser cortado no tamanho desejado. Cutimed® Siltec® PLUS adere delicadamente à pele nas bordas da ferida e permanece no lugar enquanto a fixação secundária é aplicada.

### Indicações

A linha Cutimed® Siltec® PLUS é indicada para feridas exsudativas como: úlceras venosas e arteriais, úlceras de pressão, gangrenas diabéticas, incisões cirúrgicas, enxertos de pele e áreas doadoras, lacerações ou abrasões. Cutimed® Siltec® PLUS é recomendado para feridas com níveis de exsudado de baixos a altos.

### Contraindicações

Não utilize em pacientes com sensibilidade conhecida a nenhum dos componentes do produto.

### Alertas e precauções

Cutimed® Siltec® PLUS está embalado para utilização única. Não reutilizar ou reesterilizar, já que isso apresenta um risco de transmissão de fluidos corporais ou tecidos contaminados entre os pacientes. Não utilize se a bolsa estiver aberta ou danificada. Elimine material aberto ou não utilizado do dispositivo. A ferida deve ser inspecionada quanto a sinais de infecção e tratada de acordo com a prática clínica. Apenas para uso externo. Não use com soluções oxidantes como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio. Remova o curativo antes da radioterapia.

### Instruções de uso

- Limpe a ferida de acordo com a boa prática clínica.
- Certifique-se de que a pele ao redor esteja seca.
- Escolha um tamanho de curativo apropriado que cubra a ferida e se sobreponha às bordas da ferida. **(A)**
- Abra a bolsa e retire o curativo. Assegure a esterilidade.
- Remova o filme protetor **(B)** e aplique com o lado aderente sobre a ferida. **(C)**
- Evite esticar o curativo.
- Aplique fixação adicional do curativo.
- Se necessário, o Cutimed® Siltec® PLUS pode ser usado em combinação com outros curativos. por exemplo, o Cutimed® Sorbact® (em caso de feridas infectadas) ou o Cutimed® Gel (para feridas necróticas secas).
- Cutimed® Siltec® PLUS pode ser utilizado em uma ferida infectada além da terapia antimicrobiana sob supervisão médica.
- Cutimed® Siltec® PLUS pode permanecer no local por até sete dias, dependendo das condições da ferida e dos níveis de exsudado. Recomenda-se trocar o curativo a cada 24 horas inicialmente, passando a trocas menos frequentes, se necessário.
- Remova cuidadosamente a fixação do curativo e retire cuidadosamente o Cutimed® Siltec® PLUS da ferida e jogue fora.
- Se necessário, limpe a ferida, antes da aplicação de um novo curativo.

### Armazenamento

Cutimed® Siltec® PLUS deve ser armazenado em local seco. Não exponha à luz solar direta.

**Data:** Junho de 2016

Bruksanvisning

## Cutimed® Siltec® PLUS

**S**

### Produktbeskrivning

Cutimed® Siltec® PLUS förband är ett sortiment av skumförband med ett ytskikt av silikon. Cutimed® Siltec® PLUS är ett sterilt, absorberande polyuretanförband för traumatiska förbandsbyten, som innehåller superabsorberande remсор som absorberar och håller kvar sårvätska. Det innehåller superabsorberande partiklar som absorberar och binder sårvätska. Kontaktytan mot såret har ett perforerat silikonlager som tillåter skonsam vidhäftning till den omgivande huden, men inte till den fuktiga sårbådden eller nybildad epitelvävnad. Detta minimerar både traumat och smärtan vid byte av förband. Den yttre filmen är vattenavstötande, men släpper igenom luft och ånga. Skumförbandet och de superabsorberande remsorna är utformade för att absorbera och att avlägsna överflödig sårvätska i förbandet, främja en fuktig sårmiljö och minimera risken för uppblötning. Cutimed® Siltec® PLUS är mycket följlsamt och skyddar såret. Cutimed® Siltec® PLUS lämnar inga rester i såret. Förbandet binder tillförlitligt all sårvätska även under kompression. Vid behov kan förbandet klippas till rätt storlek. Cutimed® Siltec® PLUS ger en skonsam vidhäftning i omkringliggande hud, och stannar på plats medan sekundär fixering appliceras.

### Indikationer

Cutimed® Siltec® PLUS sortiment är indicerat för vätskande sår såsom: venösa och arteriella sår, trycksår, diabetisk koldbrann, operationssnitt, hudtransplantat och donatorställen, skärsår eller skrubbsår. Cutimed® Siltec® PLUS rekommenderas för sår med låga till höga vätskenivåer.

### Kontraindikationer

Får inte användas för patienter med känd överkänslighet mot någon av produktens komponenter.

### Varningar och försiktighetsåtgärder

Cutimed® Siltec® PLUS är förpackad för engångsbruk. Får ej återanvändas eller resteriliseras eftersom det finns en risk för överföring av kroppsvätskor eller kontaminerad vävnad mellan patienter. Får inte användas om förpackningen är bruten eller skadad. Kasserad öppnat eller använt material. Inspektera om det finns tecken på infektion i såret och behandla i så fall enligt klinisk praxis. Endast för utvortes bruk. Får inte användas tillsammans med oxiderande lösningar, som t.ex. hypoklorit eller väteperoxid. Ta bort förbandet före strålebehandling.

### Bruksanvisning

- Rengör såret enligt klinisk praxis.
- Se till att den omgivande huden är torr.
- Välj en lämplig förbandstorlek som täcker såret och överlappar sårkanterna. **(A)**
- Öppna posen och ta ut förbandet. Säkerställ att det är sterilt.
- Ta bort skyddsfilmen **(B)** och fäst med den vidhäftande sidan mot såret. **(C)**
- Undvik att sträcka förbandet.
- Fixera förbandet ytterligare.
- Cutimed® Siltec® PLUS kan vid behov användas tillsammans med andra förband, t.ex. Cutimed® Sorbact® (för infekterade sår) eller Cutimed® Gel (för torra, nekrotiska sår).
- Cutimed® Siltec® PLUS får användas på infekterade sår tillsammans med antimikrobiell behandling under medicinsk övervakning.
- Cutimed® Siltec® PLUS kan vara kvar på plats i upp till sju dagar, beroende på sårtillståndet och vätskenivåerna. Vi rekommenderar att förbandet byts en gång om dygnet i början och därefter mindre ofta efter behov.
- Ta försiktigt bort förbandsfixeringen, och avlägsna försiktigt Cutimed® Siltec® PLUS från såret och släng bort det.
- Vid behov kan du rengöra såret innan du sätter på ett nytt förband.

### Förvaring

Cutimed® Siltec® PLUS bör förvaras torrt. Får ej utsättas för direkt solljus.

**Datum:** Juni 2016

Bruksanvisning

## Cutimed® Siltec® PLUS

**N**

### Produktbeskrivning

Cutimed® Siltec® PLUS bandasjer er et utvalg av silikonbelagte skumbandasjer. Cutimed® Siltec® PLUS er en steril, atraumatisk, absorberende polyuretan-skumbandasje som inneholder superabsorberende striper som absorberer og lukker sårvæske. Sårkontaktflaten er et perforert silikonlag som hefter til huden rundt såret, men ikke til den fuktige sårseengen eller nydannet vev. Dette minimerer skade og smerte ved bandasjefixt. Ytterfilmen er vannavvisende, men slipper gjennom luft og damp. Skumbandasjen med de høyabsorberende partiklene trekker til seg og holder på sårvæske. Dermet opprettholdes et fuktig sårmiljø og risikoen for masesrasjon minimeres. Cutimed® Siltec® PLUS er meget elastisk og beskytter sårområdet godt. Cutimed® Siltec® PLUS etterlater ingen bandasjerester i såret. Bandasjen holder sikkert på sårvæske, også under kompresjonsbandasje. Om nødvendig kan bandasjen kuttes til rett størrelse. Cutimed® Siltec® PLUS som hefter skånsomt til huden rundt såret og holder seg på plass mens annen fiksering påføres.

### Indikasjoner

Cutimed® Siltec® PLUS-utvalget er indisert for væskende sår som venese og arterielle sår, trykksår, diabetisk koldbrann, operasjonssnitt, hudtransplantasjoner og donorsteder, flenger eller skrubbsår. Cutimed® Siltec® PLUS anbefales for lite til sterkt væskende sår.

### Kontraindikasjoner

Må ikke brukes på pasienter med kjent overfølsomhet for noen av produktkomponentene.

### Advarsler og forholdsregler

Cutimed® Siltec® PLUS er pakket for engangsbruk. Må ikke gjenbrukes eller resteriliseres, da dette medfører fare for overføring av kroppsvæske eller kontaminert vev mellom pasienter. Produktet må ikke benyttes, hvis posen er åbnet eller skadet. Kast åpnede og delvis brukte pakninger. Inspiser såret for tegn på infeksjon og behandle det ved behov i samsvar med god klinisk praksis. Kun til utvortes bruk. Må ikke brukes sammen med oksiderende midler, for eksempel hypokloritt og hydrogenperoksid. (Cutilyth sårskylløsning kan brukes til sårskylling før påføring av Cutimed® Siltec® PLUS, men dette kan føre til en lett misfarging av skummet.) Fjern bandasjen før strålebehandling.

### Bruksanvisning

- Rens sårområdet i samsvar med god klinisk praksis.
- Tørk huden rundt såret godt.
- Velg en passende bandasjestørrelse som dekker såret og overlapper sårkanterna. **(A)**
- Åpne posen og ta ut bandasjen. Sørg for sterilitet.
- Fjern beskyttelsesfilmen **(B)** og sett på bandasjen med den klebende siden mot såret. **(C)**
- Ikke strekk bandasjen.
- Fest bandasjen med annen fiksering.
- Cutimed® Siltec® PLUS kan om nødvendig brukes sammen med andre bandasjer, for eksempel Cutimed® Sorbact® (for infiserte sår) eller Cutimed® Gel (for tørre, nekrotiske sår).
- Cutimed® Siltec® PLUS kan brukes på et infisert sår som et tillegg til antimikrobiell behandling under medisinsk tilsyn.
- Cutimed® Siltec® PLUS kan sitte på i opp til syv dager, avhengig av sårets tilstand og grad av væsking. Det anbefales at bandasjen skiftes hvert døgn i starten. Etter hvert kan bandasjen om ønskelig skiftes sjeldnere.
- Fjern bandasjefikseringen og Cutimed® Siltec® PLUS forsiktig fra såret og kast bandasjen.
- Rens om nødvendig såret før du setter på en ny bandasje.

### Oppbevaring

Cutimed® Siltec® PLUS skal lagres tørt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

**Dato:** Juni 2016

Brugsvejledning

## Cutimed® Siltec® PLUS

**DK**

### Produktbeskrivelse

Cutimed® Siltec® PLUS-forbindinger er et sortiment af silikonbelagte skumforbindinger. Cutimed® Siltec® PLUS er en steril, atraumatisk, superabsorberende forbinding af polyurethanskum til atraumatiske forbindingsskift, som indeholder superabsorberende striber, der absorberer og binder såreksudat. Sårkontaktlaget består af et perforeret silikonelag, der klæber blidt til såromgivelsen, men ikke til selve såret eller det nydannede epitelvæv. På den måde minimeres traumer og smerter i forbindelse med skift af forbinding. Det yderste forbindingslag er væskeafvisende, men gennemtrængeligt for lit og vanddamp. Skumforbindingen og de superabsorberende striber er designet til at absorbere og binde overskydende sårvæske inden i forbindingen, hvilket fremmer et fugtigt sårmiljø og minimerer risikoen for maceration. Cutimed® Siltec® PLUS tilpasser sig kroppens konturer og beskytter såromgivelsen. Cutimed® Siltec® PLUS efterlader ingen rester i såret. Selv under kompression bindes sårvæske på en sikker måde. Forbindingen kan om nødvendigt klippes til, så størrelsen passer. Cutimed® Siltec® PLUS klæber skånsomt til huden omkring såret, og forbliver på plads, mens den sekundære fiksering lægges på.

### Anvendelsesområder

Cutimed® Siltec® PLUS-sortimentet er indiceret til eksuderende sår såsom: venøse og arterielle sår, trykksår, diabetisk gangræn, operationssår, hudtransplantater og donorsteder, snitsår eller hudafskrabninger. Cutimed® Siltec® PLUS anbefales til behandling af lavt til kraftigt eksuderende sår.

### Kontraindikationer

Må ikke benyttes til patienter, der er overfølsomme overfor produkt-komponenterne.

### Advarsler og forholdsregler

Cutimed® Siltec® PLUS er beregnet til engangsbrug. Må ikke genbruges eller resteriliseres, da der er risiko for overførsel af kroppsvæsker eller kontamineret væv mellem patienter. Produktet må ikke benyttes, hvis posen er åbnet eller beskadiget. Åbnede eller ubenyttede materialer bortskaffes. Sæd undersøgtes for evt. betændelsestegn og behandles tilsvarende i overensstemmelse med principperne for god klinisk praksis. Kun til udvortes brug. Må ikke benyttes sammen med oxiderende stoffer såsom hypochlorit eller brintoverilte. Forbindingen skal fjernes inden strålebehandling.

### Anvendelse

- Rens såret i overensstemmelse med principperne for god klinisk praksis.
- Tørk huden rundt såret godt.
- Forvis dig om, at såromgivelsen er tørre.
- Vælg en egnet forbindingsstørrelse, som dækker såret og overlapper sårkanterne. **(A)**
- Åbn posen, og tag forbindingen ud. Sørg for, at steriliteten bevares.
- Fjern beskyttelsespapiret **(B)** og anbring forbindingen med den klebende side mod såret. **(C)**
- Ungdå at strække sårforbindingen.
- Sekundær fiksering af forbindingen med fikseringsbind, tape eller filmfiksering.
- Hvis sårhandlingen kræver dette, kan Cutimed® Siltec® PLUS også benyttes sammen med andre sårforbindinger, f.eks. med Cutimed® Sorbact® (til betændte sår) eller Cutimed® Gel (til tørre, nekrotiske sår).
- I forbindelse med betændte sår kan Cutimed® Siltec® PLUS benyttes sidelebende med en antimikrobiel behandling under lægeopsyn.
- Cutimed® Siltec® PLUS kan forblive på plads i op til syv dage afhængigt af sårets tilstand og eksudatvevæuet. I starten anbefales det dog at skifte forbindingen én gang i døgnet for så efterfølgende at gå over til længere intervaller.
- Skift af forbinding: Fjern nønsomt fikseringen. Cutimed® Siltec® PLUS tages forsigtigt af og bortskaffes.
- Rens evt. såret før en ny forbinding lægges på.

### Opbevaring

Cutimed® Siltec® PLUS bør opbevares tørt. Beskyttes mod direkte sollys.

**Dato:** Juni 2016

Käyttöohjeet

## Cutimed® Siltec® PLUS

**FIN**

### Tuotekuvaus

Cutimed® Siltec® PLUS -sidokset ovat silikonisidoksista koostuva tuotesarja. Cutimed® Siltec® PLUS on steriili atraumaattinen imukykyinen polyuretaanivaahotosidoste. Se sisältää superabsorbenttijuovia, joihin haavaerite imeytyy pysyvästi. Haavakontaktipinta on rei'itetty silikonikerros, joka kiinnittyy hellävaraisesti haavaa ympäröivään ihoon mutta ei kosteaan haavapohjaan tai muodostuneeseen uuteen epiteelikudokseen. Tämä auttaa minimoimaan kudoksen vaurioitumisen ja minimoi kivun sidoksia vaihdettaessa. Pintakalvo on vetähylkivä, mutta se päästää happea ja höyryä lävitseen. Vaahtomuovisidos ja superabsorbenttijuovat on suunniteltu imemään ylimääräinen haavaerite ja pitämään se sidoksen sisällä. Näin ylläpidetään kosteaan haavaympäristöä ja vähennetään maseraation (kuutosen pehmenemisen) riskiä. Cutimed® Siltec® PLUS muotoutuu hyvin ja suojaa haavaa. Cutimed® Siltec® PLUS -sidoksesta ei jää jämiä haavaan. Haavaerite pysyy sidoksen sisällä myös kompressiosidosten alla käytettäessä. Sidos voidaan tarvittaessa leikata sopivan kokoiseksi. Cutimed® Siltec® PLUS kiinnittyy hellävaraisesti haavaa ympäröivään ihoon ja pysyy paikallaan toisen siteen kiinnittämisen aikana.

### Käyttöaiheet

Cutimed® Siltec® PLUS -valikoima on tarkoitettu vuotavien haavojen hoitoon. Täällaisia ovat mm. laskimo- ja valtimoperäiset haavat, painehaavat, diabeteskuloiit, leikkaushaavat, ihosiirteet ja luovuttajakohdat, naarmut tai hiertymät. Cutimed® Siltec® PLUS -sidosta suositellaan haavoihin, joiden erityis vaihtelee vähäisestä runsaaseen.

### Käytön vasta-aiheet

Ei saa käyttää potilaille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä jollekin tuotteen ainesosista.

### Varoitukset ja varotoimenpiteet

Cutimed® Siltec® PLUS on pakattu kertakäyttöä varten. Sitä ei saa käyttää tai steriloida uudelleen, koska on olemassa riski, että kehon eritteitä tai kontaminoitunutta kudosta siirtyy potilasta toiseen. Jos pakkaus on auki tai vaurioitunut, älä käytä tuotetta. Hävitä avattu tuote tai käyttämätön materiaali. Haavaa on seurattava infektion varalta ja – tarvittaessa – hoidettava kliinisen käytännön mukaisesti. Vain ulkoiseen käyttöön. Ei saa käyttää hapettavien liuosten kuten hypokloriitin tai vetyperoksidin kanssa. Poista sidos ennen sädehoitoa.

### Käyttöohjeet

- Puhdista haava hyvän kliinisen käytännön mukaisesti.
- Varmista, että haavaa ympäröivä iho on kuiva.
- Valitse sopiva sidoskoko, joka peittää haavan ja ulottuu haavan reunojen yli. **(A)**
- Avaa pussi ja ota sidos esiin. Varmista, että se on steriili.
- Poista suojakalvo **(B)** ja aseta sidos haavan päälle kiinnityspinta haavaa vasten. **(C)**
- Älä venytä sidosta.
- Kiedo sidoksen ympärille kiinnityssidos.
- Tarvittaessa Cutimed® Siltec® PLUS -sidosta voidaan käyttää myös muiden haavatuotteiden kanssa (esimerkiksi Cutimed® Sorbact (infektoituneet haavat) tai Cutimed® Gel (kuivat, nekroottiset haavat).
- Cutimed® Siltec® PLUS -sidosta voidaan käyttää infektoituneessa haavassa antimikrobilääkehoidon lisänä lääkärin valvonnassa.
- Cutimed® Siltec® PLUS voi olla paikallaan enintään seitsemän päivää haava paranemistilanteen ja eritteen määrän mukaan.Sidos suositellaan vaihdettavaksi aluksi 24 tunnin välein. Sen jälkeen vaihtoväliä voi pidentää sen mukaan, miten haavan paraneminen etenee.
- Poista toissijaiset sidokset varovasti. Poista Cutimed® Siltec® PLUS -sidos haavasta varovasti ja hävitä se.
- Puhdista haava tarvittaessa ennen uuden sidoksen laittamista.

### Säilytys

Cutimed® Siltec® PLUS – sidokset on säilytettävä kuivassa. Suojattava suoralta auringonvalolta.

**Päivitetty:** Kesäkuu 2016

Hinweise zur Anwendung

## Cutimed® Siltec® PLUS

**D**

### Produktbeschreibung

Cutimed® Siltec® PLUS ist ein Sortiment von silikonbeschichteten Schaumverbänden. Cutimed® Siltec® PLUS ist ein steriler, absorbierender Polyurethan-Schaumverband, der für atraumatischen Verbandwechsel sorgt und Superabsorbentstreifen enthält, die zusätzlich Wundexsudat absorbieren und binden. Die Wundkontaktseite besteht aus einer perforierten Silikonsschicht, die an der Wundumgebung haftet, nicht aber am feuchten Wundbett oder an neu gebildetem Epithelgewebe. Dadurch werden Hautschädigungen und Schmerz während des Verbandwechsels weitestgehend vermieden. Der äußere Abdeckfilm ist wasserabweisend, jedoch sauerstoff- und wasserdampfdurchlässig. Der Schaumverband und die Superabsorberstreifen absorbieren überschüssige Wundflüssigkeit und schließen sie sicher im Produktinneren ein. Hierdurch wird ein physiologisches, feuchtes Wundmilieu unterstützt und gleichzeitig das Risiko von Mazerationen reduziert. Cutimed® Siltec® PLUS ist äußerst anschmiegsam und schützt die Wundumgebung. Cutimed® Siltec® PLUS hinterlässt keine Rückstände in der Wunde. Der Verband bindet das Wundexsudat sicher, auch unter Kompression. Falls erforderlich, kann der Verband zurechtgeschnitten werden. Cutimed® Siltec® PLUS haftet sanft an der Wundumgebung, sodass der Verband nicht verrutscht während er sekundär fixiert wird.

### Anwendungsgebiete

Cutimed® Siltec® PLUS ist indiziert für die Behandlung exsudierender Wunden wie z.B. venöse und arterielle Ulcera, Druckgeschwüre, diabetische Gangräne, Operationswunden, Hauttransplantationen und -Entnahmestellen, Schnitt-/Platzwunden oder Abschürfungen. Cutimed® Siltec® PLUS wird empfohlen für Wunden mit schwacher bis starker Exsudation.

### Gegenanzeigen

Bitte nicht einsetzen bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Cutimed® Siltec® PLUS ist zum einmaligen Gebrauch verpackt. Nicht wiederverwenden oder resterilisieren. Eine Wiederverwendung des Produktes setzt Patienten dem Risiko der Übertragung von Körperflüssigkeiten und Gewebefremdkörpern von vorherigen Patienten aus, die Krankheitsreger enthalten können. Nicht verwenden, wenn der Beutel geöffnet oder beschädigt ist. Geöffnetes oder nicht verbrauchtes Material entsorgen. Die Wunde sollte auf Infektionsanzeichen hin untersucht und bei Bedarf gemäß den Regeln klinischer Praxis behandelt werden. Nur zur äußeren Anwendung bestimmt. Nicht in Kombination mit oxidierenden Substanzen, wie z. B. hypochlorhaltige Lösungen oder Wasserstoffperoxid verwenden. (Cutilyth® Wundspüllösung kann vor der Anwendung von Cutimed® Siltec® PLUS für die Wundspülung verwendet werden, dies behindert nicht die Produkteigenschaften nicht, kann jedoch zu einer leichten Verfärbung des Schaums führen.) Den Verband vor Bestrahlungstherapie entfernen.

### Anwendung

- Reinigen Sie die Wunde gemäß guter klinischer Praxis.
- Stellen Sie sicher, dass die Wundumgebung trocken ist.
- Wählen Sie die Größe der Wundauflage so, dass sie die Wunde bedeckt und die Wundränder überlappt. **(A)**
- Öffnen Sie den Beutel und entnehmen Sie die Wundauflage. Stellen Sie sicher, dass das Produkt steril bleibt.
- Entfernen Sie die Schutzfolie **(B)** und applizieren Sie die haftende Seite auf die Wunde. **(C)**
- Den Verband nicht dehnen.
- Bringen Sie eine zusätzliche Verbandfixierung an.
- Falls es die Wunde erfordert, kann Cutimed® Siltec® PLUS mit anderen Verbandstoffen kombiniert werden, z. B. mit Cutimed® Sorbact® (bei infizierten Wunden) oder Cutimed® Gel (bei trockenen, nekrotischen Wundarealen).
- Cutimed® Siltec® PLUS kann bei infizierten Wunden ergänzend zu einer antimikrobiellen Therapie eingesetzt werden. Dies sollte unter medizinischer Aufsicht erfolgen.
- Cutimed® Siltec® PLUS kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation. Anfangs sollte der Verband alle 24 Stunden gewechselt werden, um dann zu längeren Verbandwechselintervallen überzuleiten.
- Entfernen Sie zusätzliche Verbandfixierung und nehmen Sie dann Cutimed® Siltec® PLUS sanft vom Wundbett ab und entsorgen Sie es.
- Falls erforderlich, reinigen Sie die Wunde bevor Sie den nächsten Verband aufbringen.

### Aufbewahrung

Cutimed® Siltec® PLUS sollte trocken gelagert werden. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

**Stand:** Juni 2016

|   |   |   |  |   |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|
|  |  |  | <p><b>Cutimed® Siltec® PLUS é adequado para:</b><br/> <b>Cutimed® Siltec® PLUS är lämpligt att använda för:</b><br/> <b>Cutimed® Siltec® PLUS egner seg til bruk ved:</b></p> <p> feridas superficiais<br/> yftliga sår<br/> overfladiske sår<br/> overfladiske sår<br/> pintahaavoissa<br/> oberflächige Wunden</p> <p> Feridas com exsudato baixo a moderado<br/> Sår med liten till måttlig mängd sårvätska<br/> Lite til moderat væskende sår<br/> Sår med lavt til moderat eksudatniveau<br/> Vähän ja kohtalaisesti erittävissä haavoissa<br/> Wunden mit schwacher bis mäßiger Exsudation</p> | <p><b>Cutimed® Siltec® PLUS er velegnet til:</b><br/> <b>Cutimed® Siltec® PLUS soveltuu käytettäväksi:</b><br/> <b>Cutimed® Siltec® PLUS ist geeignet für:</b></p> <p> Feridas com exsudato moderado a alto<br/> Sår med måttlig till riklig mängd sårvätska<br/> Moderat til sterkt væskende sår<br/> Sår med moderat til højt eksudatniveau<br/> Kohtalaisesti ja runsaasti erittävissä haavoissa<br/> Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation</p> | <p><b>STERILE</b> <b>EO</b> <b>CE 0124</b></p> <p></p> <p> Não utilizez se a embalagem estiver danificada.<br/> Använd inte förbandet om förpackningen är skadad.<br/> Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet.<br/> Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.<br/> Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut.<br/> Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.</p> | <p><b>BSN</b> medical</p> <p><b>Made and sterilized in Germany</b><br/> ® = registered trademark<br/> <b>BSN medical GmbH</b><br/> <b>Quickbornstrasse 24</b><br/> <b>20253 Hamburg · Germany</b></p> <p>16371-90048-00 / BR09153.01</p> |
|---|---|---|--|---|--|--|