

Cutimed® Siltec®

Schuimverbanden

**Betrouwbaar
exsudaat-
management**



Cutimed®


Cutimed® Siltec® schuimverbanden

Betrouwbare resultaten in alle situaties

Voor een goede wondgenezing en het welzijn van de patiënt is betrouwbaar exsudaatmanagement van essentieel belang. De hoeveelheid en aard van het exsudaat kan van dag tot dag verschillen tijdens het genezingsproces. Het is daarom belangrijk dat een schuimverband in alle omstandigheden consistente en betrouwbare resultaten levert. Vier hoogwaardige componenten maken van **Cutimed® Siltec®** het optimale wondverband voor de verzorging van chronische wonden: gemakkelijk en tijdbesparend voor u in gebruik, atraumatisch en betrouwbaar voor de patiënt.

Zekerheid voor de patiënten


Betrouwbaar voor de gebruiker

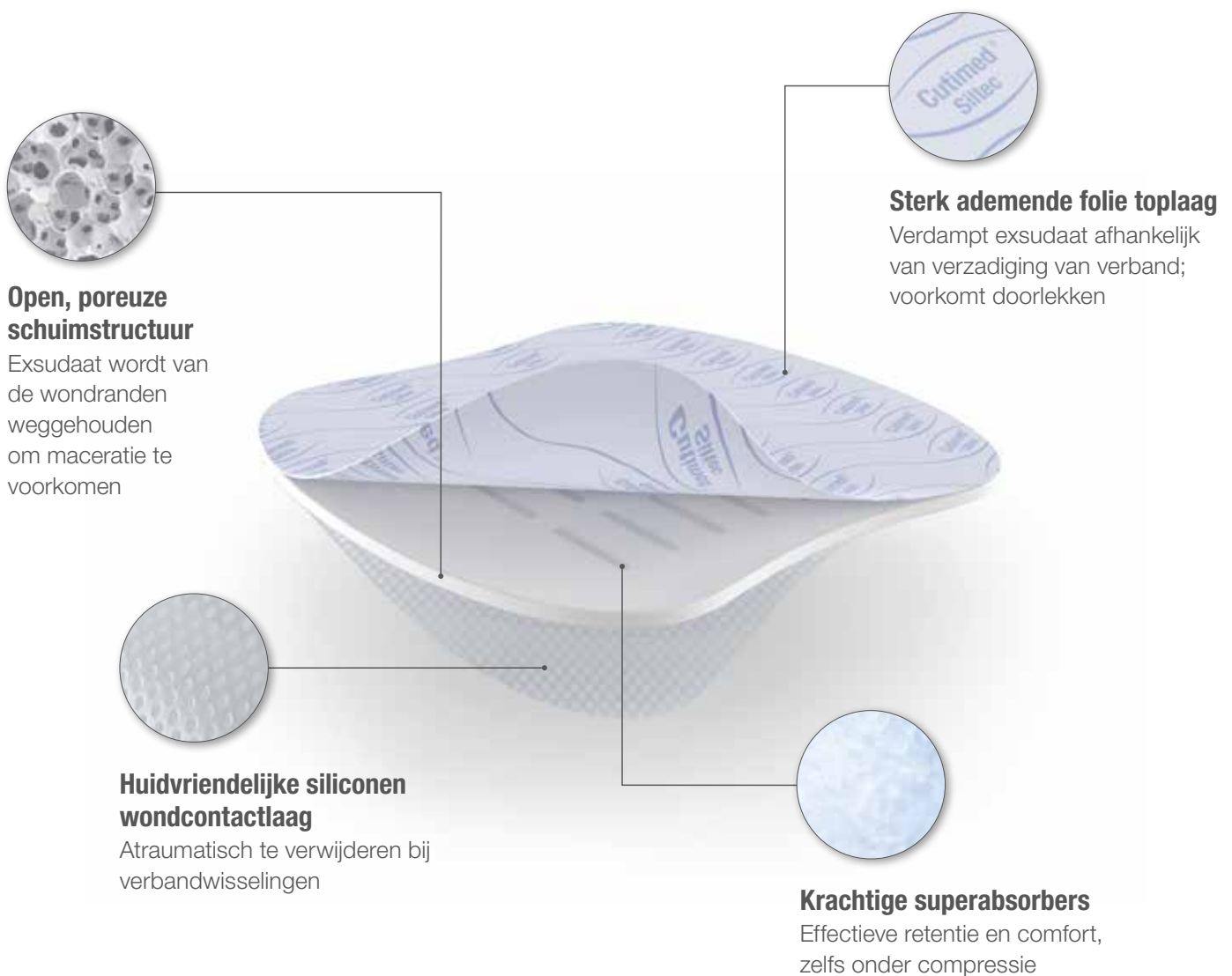

Een belangrijk werkingsprincipe van Cutimed® Siltec® schuimverbanden is verticale absorptie

Het exsudaat wordt in verticale richting van het wondbed afgevoerd.

- ① Wanneer exsudaat in aanraking komt met **Cutimed® Siltec®**, trekt het gemakkelijk via de geperforeerde siliconen wondcontactlaag in de schuimkern.
- ② De schuimkern is ontworpen met een open poriënstructuur die voor snelle verticale absorptie zorgt. Exsudaat wordt dus van het wondbed en de wondranden afgevoerd en vastgehouden in de schuimkern. Ook onder compressie.
- ③ Bovenin de schuimkern absorberen superabsorbers het exsudaat en houden dit vast (retentie), ook onder compressie.
- ④ De sterk ademende folie toplaag past het verdampen aan verzadiging van de schuimkern en superabsorbers aan. Zelfs bij variabele hoeveelheden en sterk viskeus exsudaat blijven wondranden en wondbed beschermd tegen macereren of uitdrogen.

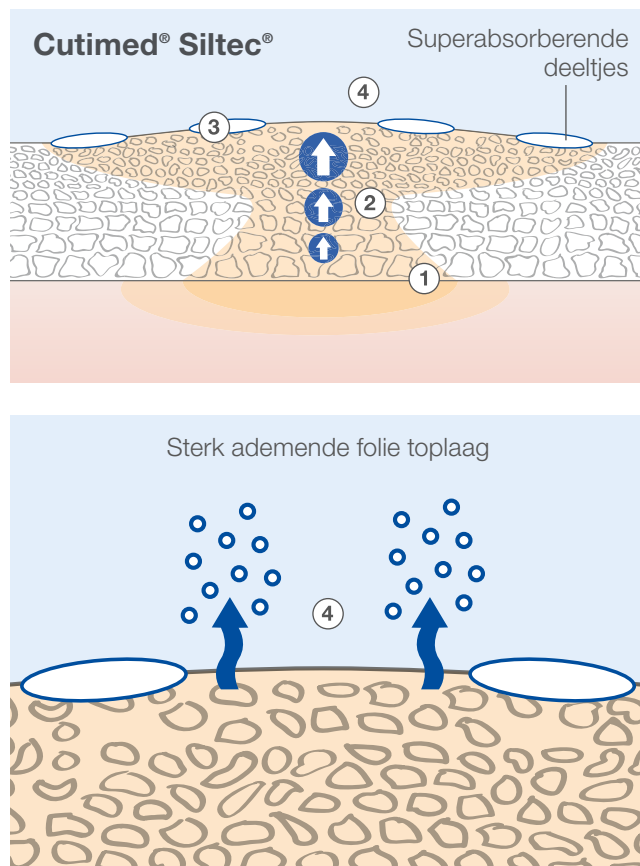




Voor meer informatie over
Cutimed® Siltec® bezoek ons
Cutimed® YouTube kanaal:



Cutimed® Siltec® schuimverbanden

Kies eenvoudig de juiste Cutimed® Siltec® variant

Hoeveelheid exsudaat		
Zeer gevoelige huid	Cutimed® Siltec® L 	Cutimed® Siltec® (standaard) 
Normale/ gevoelige huid	Fixatie nodig Cutimed® Siltec® L / Cutimed® Siltec® PLUS 	Cutimed® Siltec® PLUS / Cutimed® Siltec® (standaard) 
	Geen fixatie nodig (douchen mogelijk) Cutimed® Siltec® B 	Cutimed® Siltec® B 
Wond op de stuit	Cutimed® Siltec® Sacrum 	Cutimed® Siltec® Sacrum 
Wond op de hiel	Cutimed® Siltec® Heel 2D / 3D 	Cutimed® Siltec® Heel 2D / 3D 

Alle voordelen op een rij

Cutimed® Siltec®



Superabsorberende technologie

- Verticaal betrouwbaar absorptievermogen
- Retentie van exsudaat, ook onder compressie
- Voorkomt verweking van de wondranden
- Absorbeert zelfs viskeus exsudaat
- Minder verbandwissels



Patiëntvriendelijke siliconen wondcontactlaag en border

- Beschermt nieuw weefsel en de huid rondom de wond
- Atraumatische verbandwissels
- Opnieuw aan te brengen na observatie



Sterk ademende folie toplaag

- Exsudaat verdampt via de toplaag
- Beschermt tegen vocht, vuil en bacteriën



Anatomisch ontwerp

- Conformeert goed naar de vormen van het lichaam
- Patiëntcomfort en gebruiksgemak



Op maat te knippen

- Ook geschikt voor anatomisch uitdagende plaatsen

In aanvulling, voor Cutimed® Siltec® B



Betrouwbare fixatie

- Siliconenen border voor betrouwbare en patiëntvriendelijke fixatie



Douchebestendig

- Minder verbandwissels
- Verbetert de kwaliteit van leven

Voor de normale en gevoelige huid

Schuimverband met huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag en superabsorbers

Cutimed® Siltec® PLUS

Gebruiksgemak



- Klevende siliconen wondcontactlaag (kleeft niet op vochtig wondbed)
- Het verband blijft op zijn plaats
- Kan op maat geknipt worden
- Ook in anatomische vorm: hiel 2D (extra dik voor polsterend effect)
- Aanvullende fixatie nodig

Cutimed® Siltec® PLUS



Cutimed® Siltec® PLUS
Heel 2D


Cutimed® Siltec® B

Met huidvriendelijk klevende siliconenborder



- Met alle voordelen van Cutimed® Siltec® PLUS en:
- Betrouwbaar en huidvriendelijk klevende siliconen border
- Douchebestendig
- Ook in ovale en anatomische vorm: sacrum (met extra brede border)

Cutimed® Siltec® B

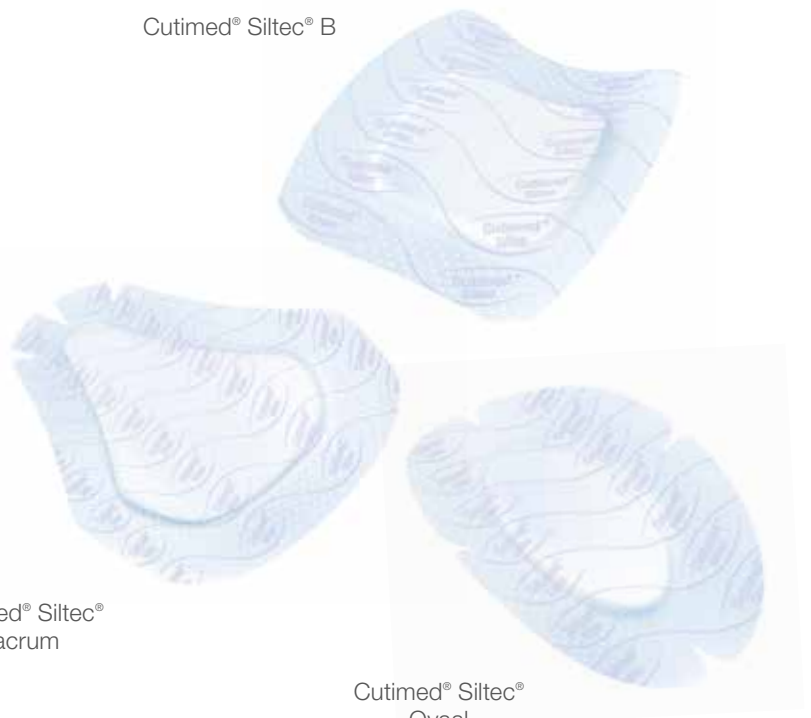

Cutimed® Siltec®
Sacrum

Cutimed® Siltec®
Ovaal

Voor zeer gevoelige en kwetsbare huid

Schuimverband met niet verklevende siliconen wondcontactlaag en superabsorbers

Cutimed® Siltec® (standaard)

Speciaal voor zeer gevoelige, kwetsbare huid



- Niet verklevende siliconen wondcontactlaag
- Voorkomt maceratie in combinatie met compressietherapie
- Kan op maat geknipt worden
- Ook in anatomische vorm: heel 3D (extra dik voor polsterend effect)
- Aanvullende fixatie nodig

Cutimed® Siltec®
(standaard)



Cutimed® Siltec®
Heel 3D

Cutimed® Siltec® L

Dun en zeer flexibel schuimverband



- Met alle voordelen van Cutimed® Siltec® (standaard) maar
- Voor epithelialiserende wonden
- Voor wonden die geen of weinig exsudaat afgeven
- Zeer plooibaar

Cutimed® Siltec® L








Productoverzicht

	Artikel nummer	Afmeting	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® Siltec® (standaard) Schuimverband met superabsorbers en <u>niet verklevende</u> siliconen wondcontactlaag	73285-00	5 x 6 cm	10	10	15390527
	73285-01	10 x 10 cm	10	10	15389847
	73285-02	10 x 20 cm	10	10	15389863
	73285-03	15 x 15 cm	10	10	15389901
	73285-04	20 x 20 cm	5	10	15389936
Cutimed® Siltec® Heel 3D	73286-01	voorgevormd	5	6	15730395
Cutimed® Siltec® L (Light) Dun schuimverband met superabsorbers en <u>niet verklevende</u> siliconen wondcontactlaag	73283-00	5 x 6 cm	10	10	15389952
	73283-01	10 x 10 cm	10	10	15389979
	73283-02	15 x 15 cm	10	10	15390004
Cutimed® Siltec® PLUS Schuimverband met superabsorbers en <u>huidvriendelijk klevende</u> siliconen wondcontactlaag	73288-00	5 x 6 cm	10	10	15930971
	73288-01	10 x 10 cm	10	10	15931005
	73288-02	10 x 20 cm	10	10	15930963
	73288-03	15 x 15 cm	10	10	15931021
	73288-04	20 x 20 cm	5	10	15931048
Cutimed® Siltec® Heel 2D	73288-05	16 x 24 cm	5	10	15930998
Cutimed® Siltec® B (Border) Schuimverband met superabsorbers en <u>huidvriendelijk klevende</u> siliconen wondcontactlaag en border	73284-00	7,5 x 7,5 cm	10	10	15390306
	73284-01	12,5 x 12,5 cm	10	10	15390314
	73284-06	10 x 22,5 cm	10	10	15930726
	73284-03	17,5 x 17,5 cm	5	10	15390322
	73284-04	22,5 x 22,5 cm	5	10	15550613
Cutimed® Siltec® Ovaal	73284-14	7 x 10 cm	10	10	16286502
	73284-21	13 x 16 cm	5	10	16813715
Cutimed® Siltec® Sacrum	73287-00	17,5 x 17,5 cm	5	10	15517462
	73287-01	23 x 23 cm	5	10	15550621

Legenda




Type weefsel

-  Wond met necrose
-  Geïnfecteerde wond
-  Wond met fibrineus beslag
-  Granulerende wond
-  Epithelialiserende wond


Hoeveelheid wondvocht

-  Geen tot weinig wondvocht
-  Weinig tot matig wondvocht
-  Matig tot veel wondvocht
-  Veel tot zeer veel wondvocht

Diepte wond

-  Oppervlakkig
-  Diep
-  Oppervlakkig + diep

Toepassingen

-  Kan op maat geknipt worden
-  Geschikt voor onder de douche