

Cutimed® Sorbion®

Uitstekend en kostenefficiënt
exsudaatmanagement

EXSUDAATMANAGEMENT



Ontdek het zachtere gevoel
dankzij de flexibelere kern

 **Cutimed®**
Your Power to Heal

Cutimed® Sorbion® creëert de ideale condities ter ondersteuning van wondgenezing

Cutimed Sorbion absorbeert wondvocht en houdt dit betrouwbaar vast in de superabsorberende kern, zelfs bij compressie. Het verband zorgt voor een vochtig wondmilieu en absorbeert verticaal micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (o.a. MMP's). Dit bevordert de wondgenezing.

Cutimed® Sorbion®



Absorptievermogen

Superieur, verticaal absorptievermogen door de gelvormende kern met unieke Hydration Response Technology



Betrouwbare retentie

Door uitstekende retentie van wondvocht wordt lekkage vermeden en worden wondranden beschermd



Veelzijdig toepasbaar

Geschikt voor wonden met matig tot zeer veel wondvocht



Meer draagcomfort

Een zachter gevoel dankzij een flexibelere kern



Eenvoudiger aan te brengen

Vormt zich naar de contouren van de wond en het lichaam

Het assortiment van Cutimed® Sorbion® biedt drie varianten, in verschillende formaten


Cutimed Sorbion Sachet

met polypropyleen wondcontactlaag verwijdert fibrineus beslag en necrotisch weefsel tijdens de verbandwissel.




Cutimed Sorbion Border

heeft dezelfde wondcontactlaag Als Cutimed Sorbion Sachet, maar heeft een waterdichte folie top laag en siliconen kleefrand.

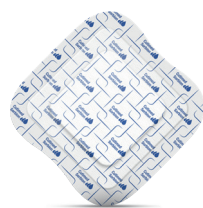

Cutimed Sorbion Sana

met polyethyleen wondcontactlaag voorkomt verkleving aan het wondbed.

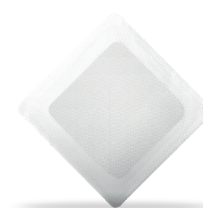


Indicatie: wonden met matig tot (zeer) veel wondvocht* zoals:

Indicatie 1



Decubitus

Indicatie 2

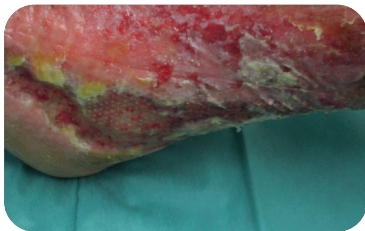

Ulcus cruris

Indicatie 3



Oncologische ulcera

Indicatie 4



Diabetische voetulcera



*Zie verder de indicaties in de IFU/gebruiksaanwijzing

Cutimed® Sorbion®:

met **bewezen** toegevoegde waarde

Effectief exsudaatmanagement

De Hydration Response Technology zorgt voor een goede vochtbalans en optimale condities voor wondgenezing.

- ◆ Behoudt een vochtig wondmilieu en absorbeert micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (o.a. MMP's).
- ◆ Superieur absorptievermogen en uitstekend hoge retentie voorkomen lekkage.
- ◆ Beperkt het risico van verweking van de wondranden door verticale absorptie.

► **Tijd en kosten besparend dankzij minder verbandwissels**




hydration
RESPONSE
technology

Ultiem gebruiksgemak

- ◆ Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht.*


► **Veilig en gemakkelijk in gebruik**

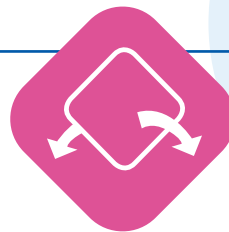

Ideaal onder compressietherapie

- ◆ Uitstekende absorptiecapaciteit en hoge retentiegraad, zelfs in combinatie met compressietherapie.

► **Optimaliseert het wond genezingsproces**

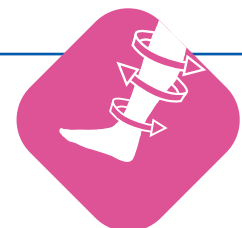

*Dit geldt niet voor Cutimed Sorbion Border



NIEUW: verbeterde flexibiliteit*



- ◆ Meer draagcomfort en een zachter gevoel dankzij een flexibelere kern.
- ◆ Vormt zich naar de contouren van de wond en het lichaam, wat het aanbrengen eenvoudiger maakt.

► **Verbeterd comfort in het aanbrengen en dragen**



Reinigend effect Cutimed® Sorbion® Sachet en -Border:

- ◆ Ondersteunt autolytisch debridement: vermindering van fibrineus beslag.

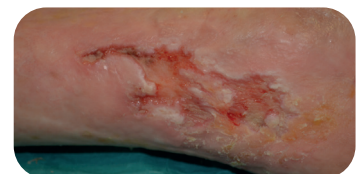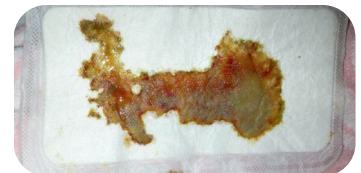

- ◆ Bindt debris en ontstekingsfactoren zoals MMP's veilig in de absorberende kern.
- ◆ Uitstekende retentieprestaties sluiten geabsorbeerd wondvocht en micro-organismen veilig in waardoor eventuele geur verminderd wordt.

► **Creëert optimale condities voor wondgenezing**

Bron: Romanelli M, Vowden K, Weir D, (2010) Exudate management made easy. Wounds Int. 1(2): p. 1-6.

Uitstekende prestaties op alle vlakken²

Gemiddeld **44.7%**

hogere opname capaciteit^{1*}

Gemiddeld **55%**

hogere retentie¹

Tot wel **28%**

kostenbesparing²

Tot wel **87%**

minder onaangename geur en pijn³




Bespaar tijd en geld tot wel 28%

- ◆ Snellere genezingstendens
- ◆ Minder verbandwissels
- ◆ Lagere personeelskosten
- ◆ Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Superieur absorptievermogen

Cutimed Sorbion Technology biedt effectief exsudaatmanagement dat de prestaties van andere superabsorberende verbanden overtreft.

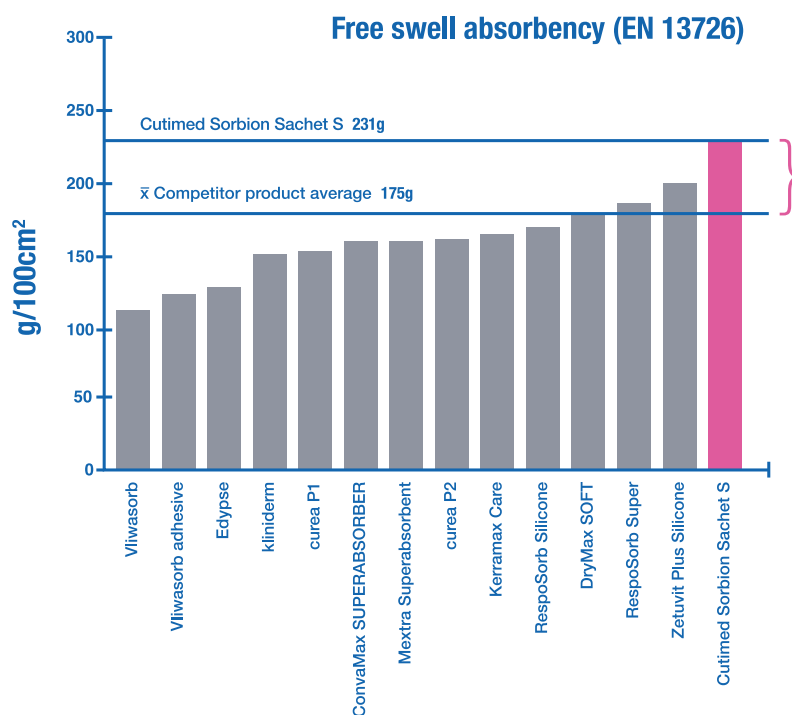

44%
meer absorptievermogen⁴

* Comparison of the retention performance: Cutimed® Sorbion® Sachet S: 203 ml average other superabsorbent: 131 ml

¹ Compared to comparable dressings (data on file).

² Panca, M., et al. (2013): "Clinical and cost-effectiveness of absorbent dressings in the treatment of highly exuding VLU's", Journal of Wound Care, Volume 22., Number 3.

³ Bronsting, K., Maassen, A. (2014): "Reduced odour and pain as indicators for quality of life in wound patients – results of an observational study", Poster presented at the Middle East Wounds and Scar Meeting, Dubai.

⁴ Essity group - commissioned laboratory testing at SMTL: Evaluation of absorbency and fluid retention of different superabsorbent wound dressings (based on EN 13726). 2024

Cutimed® Sorbion®


Bewezen behandeling in de praktijk



Case 1 – Decubitus

Anamnese

- ◆ Decubitus, patiënt 66 jaar oud, dwarslaesie met een aorta-aneurysma, complicatie na operatie door naadlekkage van de abdominale aorta
- ◆ Wond: veel exsudaat, lokale infectie, necrotisch weefsel, wondgrootte 14,8 x 7,7 cm, erytheem
- ◆ Dagelijkse verbandwissel
- ◆ Mechanische wondreiniging

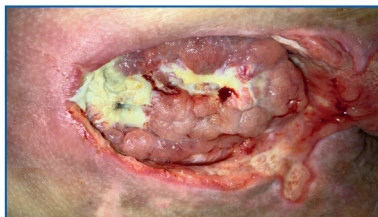

Start van de behandeling

Behandeling met Cutimed Sorbact gaasstrook en Cutimed Sorbion Carbon+



Dag 4 van de behandeling

Infectievrije en gedeeltelijk granulerende wond. Geen waarneembare wondgeur.



Dag 10 van de behandeling

Granulerende wond. Na een verbandwissel (op dag 8) werd Cutimed Alginate gebruikt als wondvuller en Cutimed Sorbion Sachet S als secundair verband.

Case 2 – Ulcus cruris

Anamnese

- ◆ Ulcus cruris aan het linkeronderbeen (ongeveer 1,5 jaar oud), patiënt 80 jaar oud
- ◆ Wond: open, sterk lekkend ulcus cruris met gelijktijdige oedeemvorming, met fibrineus beslag en rode wondranden
- ◆ Mechanische wondreiniging



Start van de behandeling

Behandeling met Cutimed Sorbact kompres en Cutimed Sorbion Sachet S.



Dag 37 van de behandeling

Roodheid en fibrineus beslag zijn verminderd tijdens de behandeling. Dit leidt tot de vorming van epitheliale eilanden en een verkleining van de wond.




Veelzijdig toepasbaar

Cutimed® Sorbion® Sachet S en -Sana De klassiekers


De klassiekers voor veilige toepassing:

- ◆ Sachet S voor soft debridement
- ◆ Sana voor het voorkomen van verkleving aan het wondbed

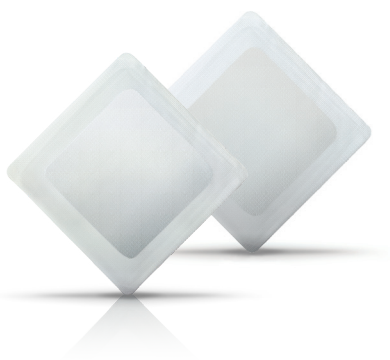

Cutimed Sorbion Border De zelfklevende

- ◆ Snelle en betrouwbare fixatie
- ◆ Voorkomt lekkage van wondvocht en dient als bescherming
- ◆ Met Cutimed Sorbion Sachet als wondcontactlaag
- ◆ Geschikt voor onder de douche
- ◆ Atraumatisch te verwijderen

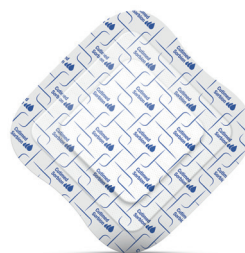

Cutimed® Sorbion® Multi Star De Flexibele

- ◆ Vormt zich naar het lichaamsdeel
- ◆ Beschikbaar met zowel Cutimed Sorbion Sachet als Cutimed Sorbion Sana wondcontactlaag



Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage De 2-delige

- ◆ Splitverband speciaal voor insteekopeningen van drains, PEG sonde en voor suprapubis catheter



Cutimed® Sorbion® XL De Grote

- ◆ Voor eenvoudige toepassing op wonden op een groot oppervlak, zoals onderbenen
- ◆ Met inkeping voor bijvoorbeeld wreef
- ◆ Met Cutimed Sorbion Sachet als wondcontactlaag






Past altijd door de verschillende varianten

Behalve drie varianten met verschillende top- en wondcontactlagen biedt het Cutimed Sorbion assortiment vele afmetingen en vormen, inclusief een XL variant. Daarmee is er altijd een juiste variant beschikbaar!

Overgang hals-hoofd

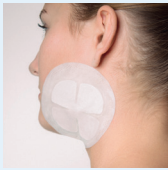

Oksel



Palm



Vinger



Elleboog



Elleboogholte



Bovenlichaam



Sacrum



Onderbeen



Voet




Bovenzijde voet




Teen



Tracheostoma

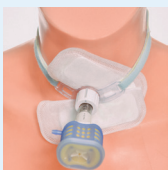


PEG sonde

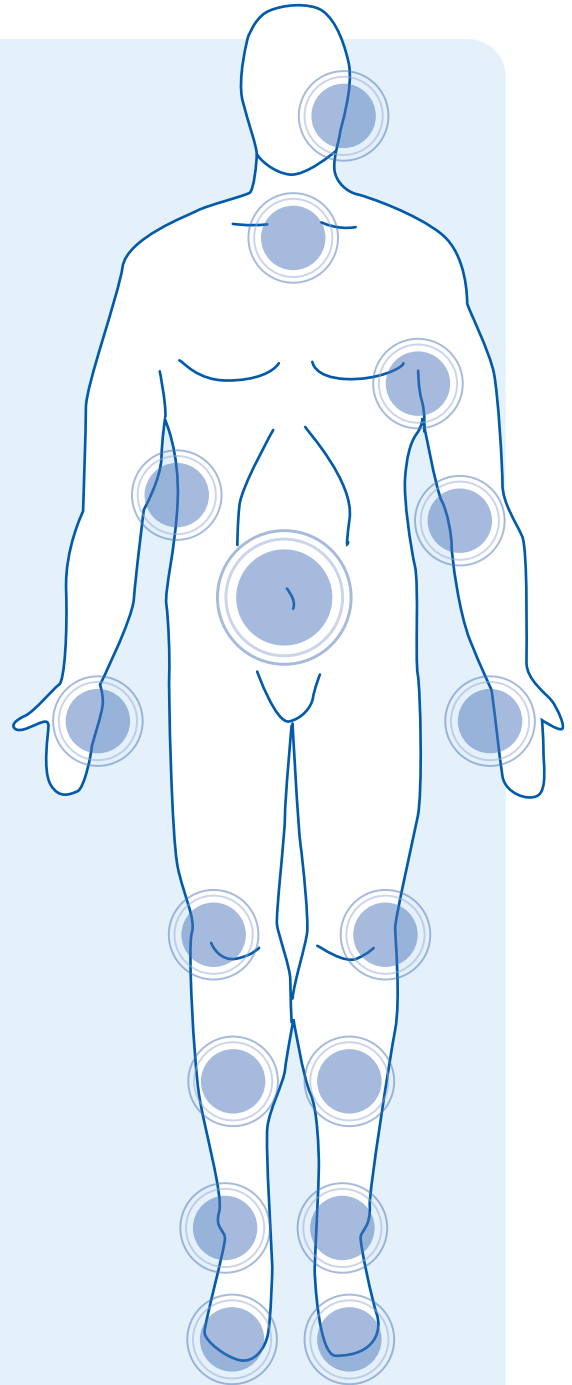

Let op: alle Cutimed Sorbion verbanden hebben aanvullende fixatie nodig, met uitzondering van Cutimed Sorbion Border.

Productoverzicht

		Artikel nummer	Afmeting	Afmeting wondkussen	Inhoud per doos	Inhoud verzend-karton	Z-index nummer		
Cutimed® Sorbion® Sachet Superabsorberend wondverband met wondcontactlaag dat op zachte wijze fibrineus beslag en necrotisch weefsel verwijdert bij iedere verbandwissel (soft debridement) 	S 	73232-00	7,5 x 7,5 cm		10	62	16187962		
		73232-01	7,5 x 7,5 cm		25	34	16187970		
		73232-06	10 x 10 cm		10	62	16187989		
		73232-07	10 x 10 cm		25	34	16187997		
		73232-09	10 x 20 cm		10	34	16188020		
		73232-10	10 x 20 cm		25	23	16188039		
		73232-12	15 x 15 cm		10	36	16188004		
		73232-13	15 x 15 cm		25	14	16188012		
		73232-15	20 x 20 cm		10	22	16188047		
		73232-16	20 x 20 cm		25	12	16188055		
		73232-18	20 x 30 cm		10	17	16188063		
		Multi Star 	73237-01	ø 8 cm		10	-	16188098	
			73237-03	ø 14 cm		10	-	16188101	
		XL 	73240-00	25 x 45 cm		10	-	16188071	
		S Drainage 	73241-00	10 x 10 cm		10	76	16211723	
		Cutimed® Sorbion® Border Superabsorberend wondverband met siliconen border voor atraumatische verbandwissels 		71010-00	10 x 10 cm	5 x 5 cm	10	32	17159814
				71010-02	15 x 15 cm	10 x 10 cm	10	14	17159849
				71010-03	20 x 20 cm	15 x 15 cm	10	12	17159857
71010-04	10 x 23 cm			5 x 18 cm	10	20	17159865		
Cutimed® Sorbion® Sana Superabsorberend wondverband met niet verklevende wondcontactlaag 		73233-00	8,5 x 8,5 cm		10	62	16188128		
		73233-03	12 x 12 cm		10	62	16188144		
		73233-04	12 x 12 cm		25	18	16188152		
		73233-06	12 x 22 cm		10	34	16188160		
		73233-07	12 x 22 cm		25	10	16188179		
		73233-09	22 x 22 cm		10	22	16188187		
		Multi Star 	73238-01	ø 11 cm		10	62	16188195	
			73238-09	ø 17 cm		10	36	16188209	