


DE LEUKOPLAST SKIN SENSITIVE FAMILIE – BETROUWBARE FIXATIE, PATIËNTVRIENDELIJK TE VERWIJDEREN

#HealingMeSoftly

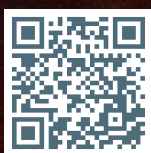

Vraag hier een gratis
sampleset aan!

Leukoplast®

Healing for every body

De kwetsbare huid vraagt om speciale oplossingen

De keuze van het wondverband en fixatie zijn een integraal onderdeel van de dagelijkse routine in de medische zorg. De inzet van de wondverbanden en de verwijdering ervan kan een negatief effect hebben op de huid, waarbij de kleeftlaag een belangrijke rol speelt. Dit geldt vooral voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid waarbij we de integriteit van de huid helpen te beschermen. Een siliconen kleeftlaag is in deze gevallen de meest geschikte oplossing. De lagere oppervlaktespanning van siliconen maakt atraumatische verwijdering mogelijk.*

Wie zijn deze patiëntgroepen?



Oudere patiënten



Baby's en jonge kinderen



Patiënten van wie de huid is aangedaan door medicatie



Patiënten van wie de huid is aangedaan door ziekte



Patiënten met frequente verbandwissels


* Een siliconen kleeftlaag heeft een lage oppervlaktespanning waardoor deze zich aanpast aan de natuurlijke contouren van de huid. Siliconen komen snel in contact met het hele huidoppervlak waardoor snel een veilige hechting wordt gecreëerd. Deze hechting blijft in loop van de tijd constant. Deze eigenschappen resulteren in minder neiging tot huidbeschadiging, er is minder kracht nodig bij verwijderen en dus minder ongemak voor de patiënt.





Huidbeschadigingen veroorzaakt door kleeblagen: ernstiger dan het lijkt

Huidbeschadiging veroorzaakt door kleeblagen lijkt misschien een klein probleem, maar het gebeurt dagelijks en wordt kostbaar naar verloop van tijd.

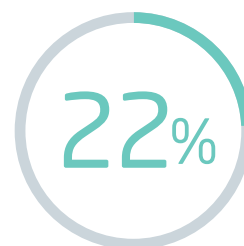

van de skin tears wordt veroorzaakt door kleeblagen¹

Veiligere en efficiëntere behandeling van een kwetsbare huid

Leukoplast skin sensitive helpt het risico op huidbeschadigingen door kleeblagen te verkleinen en dus aanzienlijk te besparen op behandel tijd en kosten.



Sterke producteigenschappen van de Leukoplast® skin sensitive productlijn met siliconen klee laag:

Betrouwbare fixatie

Atraumatische verwijdering

Herpositioneerbaar

Voorkomt huidbeschadiging door kleeblagen

¹ Strazieri-Pulido KC, Peres GR, Campanili TC, Santos VL: Skin tear prevalence and associated factors: a systematic review. Rev Esc Enferm USP; 2015 Aug; 49 (4): 674-80



Wondverbanden op basis van siliconen


Leukoplast skin sensitive producten combineren betrouwbare fixatie en atraumatische verwijdering. Dit komt door het gebruik van siliconen in plaats van polyacrylaat of zelfs zinkoxide rubber. Siliconen bieden een goede hechting, maar "lijmt" niet op de huid zoals traditionele kleeflagen dat doen.



Bij verwijdering

Standaard kleeflagen

- Maken in eerste instantie beperkt huidcontact
- Vereisen hogere hechtingskracht
- Warmen na verloop van tijd op en vullen onregelmatigheden van de huid voor betere hechting

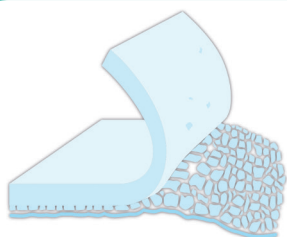

Bij verwijdering

Siliconen kleeflagen


- Hebben lage oppervlaktespanning waardoor deze direct in contact komt met hele huidoppervlak
- Hebben minder hechting nodig voor een betrouwbare fixatie
- Vereisen minder kracht bij verwijdering

Productprestaties overtuigen patiënten en gebruikers


Een studie¹ naar de **productprestaties van Fixomull skin sensitive**, onder patiënten met een kwetsbare of aangetaste huid, bewijst:



bevestigt een
atraumatische verwijdering

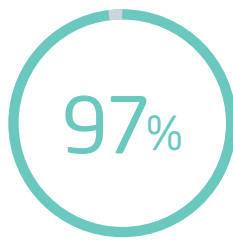

bevestigt een
pijnvrije verwijdering

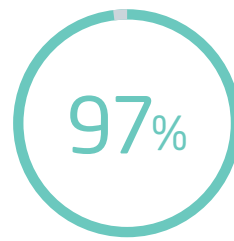

bevestigt de
betrouwbaarheid van fixatie

Bespaar tijd en kosten

Wonden kosten tijd en geld. Elke wond die je kunt voorkomen, bespaart dus tijd en kosten. Een studie² in Duitsland laat zien dat producten op basis van siliconen de kosten voor behandel tijd en verbandmaterialen kunnen verlagen. De deelnemende ziekenhuizen bespaarden gemiddeld meer dan € 80 per patiënt. Het is makkelijk in te schatten hoeveel je kunt besparen door het gebruik van Leukoplast skin sensitive producten.

Berekening van kosten die gepaard gaan met wonden veroorzaakt door kleeflagen o.b.v. Duitse studie²:



+

×

7,8

Ø-aantal benodigde
behandelingen om
genezing te bereiken

+

€3,01

Ø-kosten tijd verpleeg-
kundige voor management-
administratie van wonden
veroorzaakt door
kleeflagen³

=



**Totale kosten per patiënt met
wonden veroorzaakt door kleeflagen**

> € 80

¹ A prospective, multicenter, observational study with Fixomull skin sensitive was conducted under routine clinical conditions over a period of 1 up to 7 days in 4 German hospitals or private practices with 57 patients, there of 35 patients with fragile or compromised skin to evaluate the product characteristics of an adhesive fixation dressing, tested product: Fixomull skin sensitive, sponsored by Essity, 2017; data on file ² Maene: Hidden costs of medical tape induced skin injuries; Wounds UK; 2013; 9 (1) ³ For the whole duration of the treatment

Nú een nog breder assortiment

De Leukoplast skin sensitive range biedt een **atraumatische oplossing** voor de meeste toepassingen:



Fixatie producten

niet steriel



Leukoplast®

Fixomull® *skin sensitive* volvlakfixatie

Voor fixatie van wondverband met groot formaat
of voor grote oppervlakten

- Kan makkelijk worden aangepast aan de gewenste grootte
- Zeer geschikt voor bewegende delen van het lichaam
- Douchebestendig
- Herkenbaar product design



Leukoplast® *skin sensitive* hechtpleister

Voor betrouwbare fixatie van wondverbanden of
medische hulpmiddelen

- Makkelijk te scheuren, schaar niet nodig
- Antimicrobiële houder voor verlaagd risico op cross-contaminatie; > 99,9% MRSA reductie binnen 6 uur
- Snel en gemakkelijk aan te brengen

Wondverbanden

steriel



Leukoplast®

Leukomed® *skin sensitive* non-woven eilandpleister

Voor het beschermen van de wond

- Huidvriendelijk en atraumatisch te verwijderen
- Bedekt en beschermt wonden, zoals gesloten chirurgische wonden, snij- en schaafwonden.
- Absorbeert bloed en wondvocht
- Douchebestendig



Leukoplast®

Leukomed® T *skin sensitive* transparante folie

Voor het beschermen van de wond

- Beschermst droge postoperatieve en oppervlakkige traumatische wonden tegen vocht en bacteriën van buitenaf
- Steriele fixatie van primaire verbanden en kompressen
- Secundair- of complex genezende wonden
- Bescherming van droge wonden tegen wrijving- en schuifkrachten



Leukoplast®

Leukomed® T plus *skin sensitive* transparante eilandpleister

Voor het beschermen van de wond

- Acute en secundair- of complex genezende wonden
- Beschermst chirurgische wonden tegen vocht en bacteriën van buitenaf
- Bedekt en beschermt oppervlakkige snij- en schaafwonden en oppervlakkige 2e-graads brandwonden
- Absorbeert bloed en wondvocht

Leukoplast®

Healing for every body

Productoverzicht

Bestel nu - dé oplossing voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid

niet steriel

Fixatie producten	Fixomull skin sensitive				
		Maat	Artikelnummer	Inhoud	ZI-nummer
		5 m x 5 cm	79965-01	1 rol	16781694
		5 m x 10 cm	79965-02	1 rol	16781708
		5 m x 15 cm	79965-03	1 rol	16781716
		2 m x 10 cm	79965-04	1 rol	16781724
	Leukoplast skin sensitive				
		Maat	Artikelnummer	Inhoud	ZI-nummer
		1,25 cm x 2,6 m	76173-00	1 rol	17076609
		2,5 cm x 2,6 m	76173-01	1 rol	17076633
		2,5 cm x 1 m	76173-06	1 rol	17076641
		2,5 cm x 2,6 m (zonder klemring)	76175-00	1 rol	17076668

steriel

Wondverbanden	Leukomed skin sensitive				
		Maat	Artikelnummer	Inhoud	ZI-nummer
		5 cm x 7,2 cm	71239-04	5 per doos	17076560
		8 cm x 10 cm	71239-05	5 per doos	17076587
		8 cm x 15 cm	71239-06	5 per doos	17076595
		5 cm x 7,2 cm	71239-08	10 per doos	17439957
		8 cm x 10 cm	71239-09	10 per doos	17439965
		8 cm x 15 cm	71239-10	10 per doos	17439981
	Leukomed T skin sensitive				
		Maat	Artikelnummer	Inhoud	ZI-nummer
		5 cm x 7,2 cm	76464-00	5 per doos	16869966
		8 cm x 10 cm	76464-01	5 per doos	16869974
		8 cm x 15 cm	76464-02	5 per doos	16869990
	Leukomed T plus skin sensitive				
		Maat	Artikelnummer	Inhoud	ZI-nummer
		5 cm x 7,2 cm	76178-00	5 per doos	16869893
		8 cm x 10 cm	76178-01	5 per doos	16869915
		8 cm x 15 cm	76178-02	5 per doos	16869923
		10 cm x 25 cm	76178-03	5 per doos	16869931

NB: niet geschikt voor fixatie als de complicaties bij loslaten ten koste gaat van patiëntveiligheid



Scan deze QR-code
voor meer informatie

