
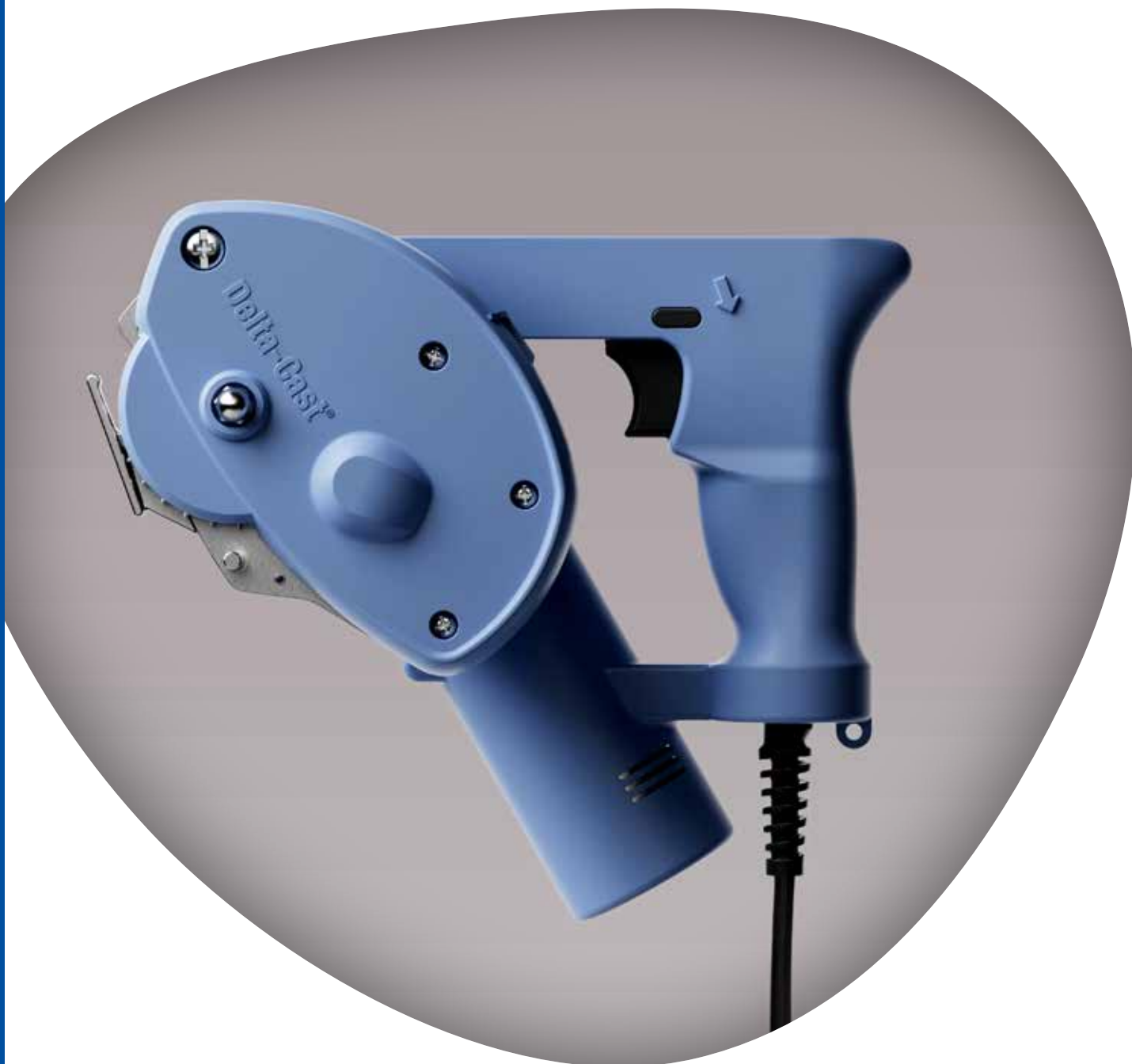


Delta-Cast®

Serene™

De nieuwe manier om
(synthetisch) gips te verwijderen

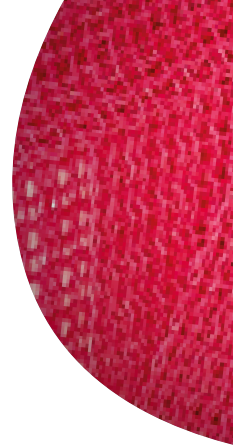

Delta - Cast®



Het is tijd voor iets nieuws: een veilige angstreducerende manier om (synthetisch) gips te verwijderen

Maak kennis met: Delta-Cast® Serene™

Delta-Cast® is wereldwijd marktleider van (synthetische) gipsverbanden en spalken.


Na 80 jaar werken met een elektrische gipszaag is er een innovatie op het gebied van gips verwijderen. De eerste gipsnijder in zijn soort: één die de procedure verandert.

(Synthetisch) gips verwijderen is op deze manier **stiller, veiliger en eenvoudiger**.

Dit is de nieuwe standaard voor **kwaliteit, gebruiksgemak en veiligheid**.



Serene by name, Serene by nature.

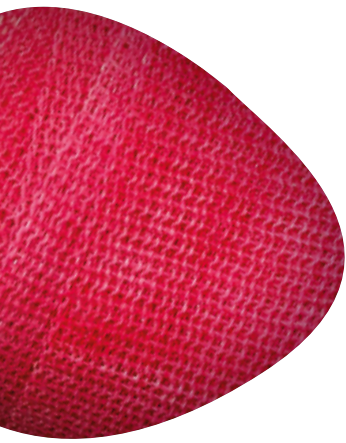

Voordelen van Delta-Cast® Serene™

- **Schoner:** het mes houdt de lucht vrij van stofdeeltjes. Zo blijft de lucht en de werkomgeving schoner. Er is geen afzuigstelsel nodig.
- **Handig in gebruik:** het gewicht van het gebalanceerde apparaat rust op het gipsverband, zodat het bijna moeiteloos met één hand bediend kan worden.
- **Stiller:** maakt minder geluid dan een traditionele gipszaag en creëert daarmee een aangename werkomgeving.
- **Patiëntvriendelijk:** het mes is afgeschermd en veroorzaakt geen trillingen of warmte, wat angstreducerend kan werken.
- **Doeltreffend:** snijdt moeiteloos en volledig door tot wel 10 lagen synthetisch gipsmateriaal.
- **Eenvoudig in onderhoud:** het mes kan tot 200 gipsen verwijderen en is snel te vervangen en makkelijk schoon te maken.
- **Draagbaar:** mobiel en eenvoudig te verplaatsen. Afzuigstelsel is niet nodig.
- **Veiliger:** werkt zonder oscillerend zaagblad en heeft een beschermingsvoet. Het mes is afgeschermd. Minder risico op complicaties.

Een nieuwe methode om (synthetisch) gips veiliger, stiller en eenvoudiger te verwijderen



Bestel nu

Artikelnummer	Omschrijving	Onderdelen
76289-01	Delta-Cast® Serene™ Set	1 apparaat 1 extra mes 1 voedingskabel
76289-05	Delta-Cast® Serene™ Pin	1 pin
76289-06	Delta-Cast® Serene™ Beschermingsvoet	1 beschermingsvoet
76289-07	Delta-Cast® Serene™ Reserve messen	10 reserve messen
76289-11	Delta-Cast® Serene™ Voedingskabel	1 voedingskabel