

Leukoplast® wound closure strip

Elastische wondhechtstrips

Eigenschappen en functies

Steriele wondhechtstrips voor het betrouwbaar en non-invasief sluiten van wonden. De unieke weefstructuur maakt de strip elastisch. Hierdoor kan de strip zwelling rondom de wond opvangen. Door het gebruik van polyamide is de strip lucht- en waterdampdoorlaatbaar en voorkomt hierdoor maceratie van de huid. De afgeronde hoeken maken blijvend betere fixatie van de strip mogelijk, bovendien is deze voorzien van een hypo-allergene kleeflaag (latexvrij) en dus huidvriendelijk.

Toepassingen

Wondhechtstrips kunnen ingezet worden voor het sluiten van niet-exsuderende, oppervlakkige wonden (primair en secundair), ter fixatie van huidtransplantaten en ter ondersteuning van

sub- en intracutane hechtingen bij wonden met weinig trekkracht op de huid.

Voordelen voor de patiënt

- Pijnloos aanbrengen en verwijderen
 - Betrouwbare fixatie
 - Geen littekenvorming door hechten
 - Geschikt voor kwetsbare en gevoelige huid
 - Comfortabel
- Minimale irritatie van huid rondom de wond
- Geen trekkracht op de huid en wond
- De patiënt kan (kort) douchen




Assortiment

Leukoplast® wound closure strip								
Omschrijving	Artikelnummer	Verpakking	Kleur	Kleur pouch	Strips per pouch	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
6 x 38 mm	71292-00	klein	wit	■	6	10 x 6	16	17156203
6 x 38 mm	72740-00	groot	wit	■	6	50 x 6	4	17156254
6 x 38 mm	72740-06	groot	beige	■	6	50 x 6	4	17156300
6 x 75 mm	71292-02	klein	wit	■	3	10 x 3	16	17156211
6 x 75 mm	72740-02	groot	wit	■	3	50 x 3	4	17156262
6 x 75 mm	72740-07	groot	beige	■	3	50 x 3	4	17156319
6 x 100 mm	72740-03	groot	wit	■	10	50 x 10	4	17156270
12 x 100 mm	71292-04	klein	wit	■	6	10 x 6	16	17156238
12 x 100 mm	72740-04	groot	wit	■	6	50 x 6	4	17156289
12 x 100 mm	72740-08	groot	beige	■	6	50 x 6	4	17156327
25 x 100 mm	72740-05	groot	wit	■	4	25 x 4	4	17156297


Leukoplast®

Wound care in best hands


De werking van Leukoplast® wound closure strip

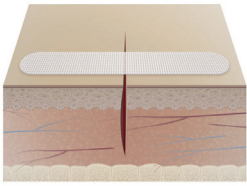

Leukoplast wound closure strip direct na aanbrengen op de wond

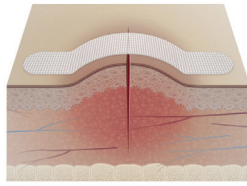

Leukoplast wound closure strip zet tijdens de oedeemfase uit

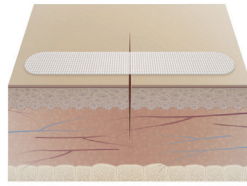

Na het afnemen van de zwelling keert Leukoplast wound closure strip naar de oorspronkelijke lengte terug

Maatvoering

6 x 38 mm - kleinverpakking wit/groot verpakking wit en huidskleur
(1 dubbele kaart/6 strips)



6 x 75 mm - kleinverpakking wit/groot verpakking wit en huidskleur
(1 kaart/3 strips)



12 x 100 mm - kleinverpakking wit/groot verpakking wit en huidskleur
(2 kaarten/6 strips)



6 x 100 mm - grootverpakking wit
(1 kaart/5 strips of 2 kaarten/10 strips)



25 x 100 mm - grootverpakking wit
(2 kaarten/4 strips)

